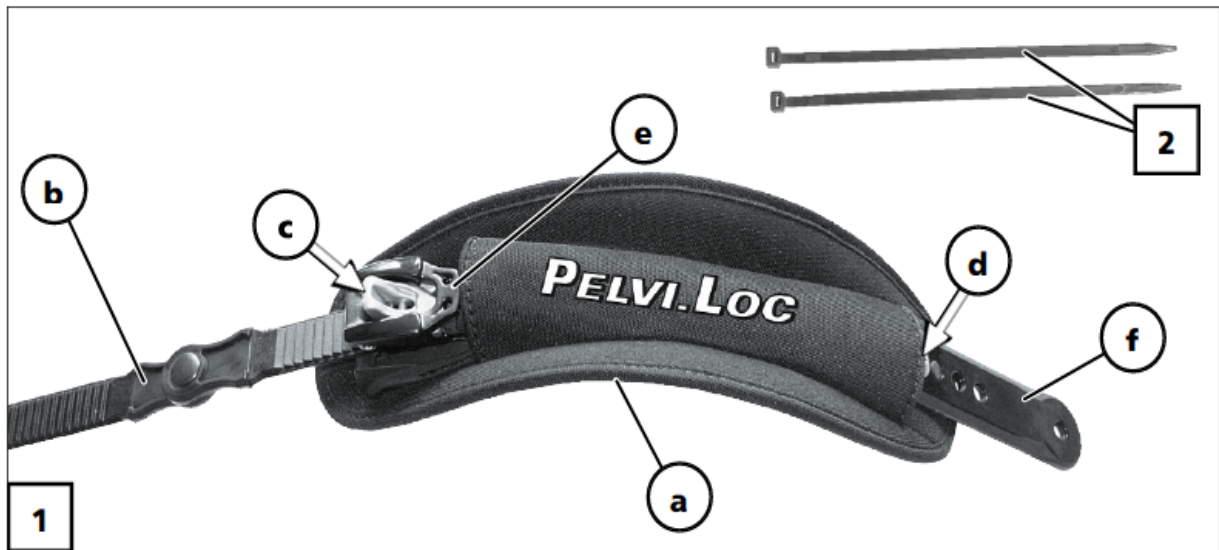




## PELVI.LOC® PL-2DB -XXS, -XS, -S, -M, -L, -XL



For sikker brug af dette produkt bedes De læse denne montage- og brugsanvisning, inden det tages i brug første gang.



### Anvendelsesområde

PELVI.LOC® PL-2DB hjælper personer med begrænset mobilitet specielt i lår-positionering i kørestol og aktiv-kørestol og forhindrer, at de glider fremad.

### Påtænkt patientgruppe:

- Børn, unge og voksne
- Køn: kvinder og mænd

### Modtagelseskontrol

Pak produktet helt ud og kontroller at forsendelsen er komplet og fri for transportskader. Hvis De konstaterer, at der mod forventning er fejl ved forsendelsen, så skal

1. De reklamere med det samme hos fragtmanden
2. lade skaden / fejlen føres til protokol
3. omgående informere os eller Deres faghandler

### Leveringsomfang

- 1) 1 x PELVI.LOC® PL-2DB – XXS, -XS, -S, -M, -L, -XL formonteret
- 2) 2 x Kabelbindere 7,8 mm
- 3) informationer om online download af montage- og brugsanvisning

### Kombination af medicinsk udstyr

Egnet til hjælpemidler, der er beregnet til brug af en bækkenretraktionssele.

## Montage



Montagen skal udføres af en person med fagkendskab

1. Pudene (a) placeres altid i lårområdet. – derved ligger tandremmen (b) for oven
  - Logoet på pudene er derefter læsbar forfra!
2. Juster afstanden mellem puderne over tandremmen (b) ved at aktivere skraldespænderne (e).
  - Tandremmens led skal være midt på mellem puderne.
  - Tandremmen skal maksimalt trækkes så langt ud, at der stadig er to tænder fri bag hver hver snapper (c).
  - Ved indstilling kan velcrobåndet løsnes, og pudene kan slå op (skal overholdes kun ved remme, hvor skraldespænderne er dækket.)
3. Derefter fastgøres hulremmene (f) til kørestolens rammerør.
4. Tandremmen (b) spændes lige meget på begge sider og lige meget, at der endnu er plads til en flad hånd mellem lår og pude.
5. Efter behov kan tandremmens ender afkortes halvrundt. Enderne af den afkortede tandrem afgrates i givet fald – risiko for tilskadekomst!
6. Låseanordningen på begge sider af hul-/tandremmen kontrolleres!



## Brugsanvisning



## Sikkerhedsanvisninger

Trods den stabile konstruktion er hulremme, tandremme og puder udsat for en vis slitage. Derfor anbefales det at kontrollere **PELVI.LOC**<sup>®</sup> grundigt hver 3. måned. Her skal man også være opmærksom på, at nitter og skrueforbindelser sidder godt fast!

- Før brug skal man kontrollere, at produktet er i brugsejnet tilstand og sidder korrekt – risiko for uheld!
- Beskadigede komponenter såsom hulrem/gjort (f), tandrem (b) eller pude (a) må ikke være lappet eller limet og sat i igen - risiko for uheld!
- Sæt dig ikke på pudene – fare for tryksteder specielt på grund af skraldespænderne!
- Løft ikke kørestolen op over **PELVI.LOC**<sup>®</sup> risiko for uheld!
- Pas på at hænderne ikke kommer i klemme mellem hulrem og ramme- og sidderør – fare for kvæstelse!

## Brugsbegrænsninger / uønskede bivirkninger

- **PELVI.LOC**<sup>®</sup> må ikke anvendes, hvis der i pudeområdet er tryksteder, sår eller andre ikke heledede skader – risiko for tilskadekomst!
- **PELVI.LOC**<sup>®</sup> må ikke anvendes ved knoglesvind, glasknogler eller kraftigt nedsat blodgennemstrømning – fare for tilskadekomst!
- Efter rengøring kontrolleres det, at **PELVI.LOC**<sup>®</sup> fungerer korrekt
- En beskadiget **PELVI.LOC**<sup>®</sup> skal omgående fornyes – fare for uheld!



### **Pas på:**

- **PELVI.LOC®** er ikke en del af tilbageholdelsessystemet for kørestolen og/eller brugere ved transport i et handikapkøretøj.
- Hverken producent eller salgsafdeling kan gøres ansvarlig for skader eller risici, hvad angår produktansvar, som er forårsaget af børn uden opsyn, i sammenhang med produktet.

### **Anvendelse**

1. Til brug af **PELVI.LOC®** placeres puderne (a) på låret



**Pas på:** Vær opmærksom på, at der ikke er nogen genstande under puderne. Sådan undgås smertende tryksteder.

2. **Vigtigt:** Må ikke lægges på bækken eller spina!
  3. Så føres tandremmen (b) gennem den aktuelle skralde. Derved aktiveres den tilhørende skraldespænde (e).
  4. Derefter spændes tandremmen (b) så meget, at der endnu er plads til en flad hånd mellem lår og polstring.
  5. Sørg for at, snapperne (c) griber ind i tænderne på tandremmen!
- Udfør en trækprøve!

Hvis der under brugen af **PELVI.LOC®** sker en utilsigtet løsning af positioneringssystemet, kan det udbedres ved at spænde det igen..

**For at åbne **PELVI.LOC®**** aktiveres snapperen (c), og tandremmen trækkes ud.

- Pas på at puden ikke kommer i klemme mellem egerne på drivhjulet!

### **Rengøring og desinfektion**

- Egnet til vaskemaskine op til 40 grader.
- Kemotermisk desinfektion mulig ved tilsætning af ELTRA 40 til vaskeprogrammet
- Må ikke slynges.
- Ikke egnet til tørretumbler

### **Vedligeholdelse**

**PELVI.LOC®** skal kontrolleres regelmæssigt for skader og funktion.

### **Reparationer**


Defekte **PELVI.LOC®** skal omgående udskiftes.

## Bortskaffelse

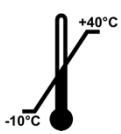

- Apparatets emballage kan afleveres til genbrug.
- Metaldele kan afleveres til genbrug.
- Kunststofdele kan afleveres til genbrug af kunststoffer.
- Bortskaffelsen kan ske i henhold til de relevante nationale, lovmæssige bestemmelser.
- Spørg venligst by-/kommuneadministrationen om lokale virksomheder med bortskaffelse.



Tekniske data	XXS	XS	S	M	L	XL
Sædebredde (cm)	12 - 20	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	44 - 52
Pudestørrelse (cm)	12 x 7	17 x 7	20 x 7	22 x 8	25,5 x 8	28,5 x 9
Vægt (g)	200	220	220	280	280	300
Teoretisk brudsted (ved ca. kg)	40	60	60	80	80	80

Tandrem str. XXS - S	1,9 x 0,2 x 17,0 cm	Produkter er latexfri	
Tandrem str. M - XL	2,4 x 0,2 x 17,0 cm		

## Opbevarings- og transportbetingelser

	Temperaturområde for langtidsopbevaring fra -10 °C til +40 °C. Kortvarige temperaturspidser, f.eks. under transport, fra -20 °C til +60 °C tolereres godt af materialet og påvirker ikke produktets sikkerhed og ydeevne.
	Beskyttes mod fugt under opbevaring og transport

## Garanti

Vi påtager os garantien i henhold til lovbestemmelserne i henhold til lovbestemmelserne. Garantien gælder for materiale- og produktionsfejl. Undtaget herfra er sliddele og dele/komponenter, der er underlagt normalt slid samt skader, der som følge af overdrevet belastning, „forkert brug“, voldsom beskadigelse eller ændring/istandsættelse, der ikke er tilladt. I tilfælde af, at der skal ydes garanti, bedes De kontakte Deres faghandler, hvor De har købt dette produkt. På grund af produktansvar må reparation, vedligeholdelse- og istandsættelsesarbejde kun udføres af en autoriseret faghandler, med anvendelse af originale reservedele



**Producent:**

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Tlf: +49 (08373) 987269

Fax: +49 (08373) 987276

Email: [info@a2j-intl.com](mailto:info@a2j-intl.com)

Internet: [www.a2j-intl.com](http://www.a2j-intl.com)

Opdateret 01.10.2021



Dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav i EU's forordning om medicinsk udstyr 2017/745 - Medical Device Regulation (MDR).

Ret til tekniske ændringer forbeholdes.