



PELVI.LOC® PL-3DASR - XS, -S, -M, -L



Funktionen under affæknigen se nedenstående billede



For sikker brug af dette produkt bedes De læse denne montage- og brugsanvisning, inden det tages i brug første gang.



Anvendelsesområde

PELVI.LOC® PL-3DASR hjælper personer med begrænset mobilitet specielt i bækken-lår-positionering i kørestol og aktiv-kørestol og forhindrer, at de glider fremad.

Påtænkt patientgruppe:

- Børn, unge og voksne
- Køn: kvinder og mænd

Modtagelseskontrol

Pak produktet helt ud og kontroller at forsendelsen er komplet og fri for transportskader. Hvis De konstaterer, at der mod forventning er fejl ved forsendelsen, så, skal

1. De reklamere med det samme hos fragtmanden
2. lade skaden / fejlen føres til protokol
3. omgående informere os eller Deres faghandler

Leveringsomfang

- 1) 1 x **PELVI.LOC**® PL-3DASR -XS, -S, -M, -L, ikke formonteret.
- 2) 1 x Informationer om online download af montage- og brugsanvisning

Kombination af medicinsk udstyr

Egnet til hjælpemidler, der er beregnet til brug af en bækkenretraktionssele.

Montage



Montage skal udføres af en person med fagkendskab.

1. Puderne (a) placeres altid i lårområdet. – tandremmen (b) fastgøres til kørestolen.
 - Logoet kan derefter læses forfra!
2. Juster afstanden mellem puderne ved hjælp af hulremmen (d). bækkenretraktions-selen strammes med skraldespænderne.(e)
 - Hulremmens led skal så befinde sig midt mellem puderne.
 - Tandremmen trækkes så langt ud, at der endnu er to tænder fri bag ved hvert skraldespænde (e).
 - Til indstilling af tandbæltet kan velcrobåndet løsnes, og puden slås op (skal kun overholdes ved bæltet med dækkede skraldespænder)
3. Efterfølgende fastgøres tandremmen (b) til kørestolens rammerør.
4. Tandremmen (b) strammes lige meget på begge sider og så meget, at der endnu er plads nok til en flad hånd mellem lår og pude.
5. Efter behov kan begge ender af tandbæltet afkortes halvrundt. Enderne af det afkortede tandbæltet afgrates i givet fald – risiko for tilskadekomst!
6. Låseanordningen på begge sider af tandbåndet kontrolleres.



Brugsanvisning



Sikkerhedsadvarsler

Trods den stabile konstruktion er hulremme, tandremme og puder udsat for en vis slitage. Derfor anbefales det at kontrollere **PELVI.LOC**® grundigt hver 3. måned. Her skal man også være opmærksom på, at nitter og skrueforbindelser sidder godt fast!

- Før brug skal man kontrollere, at produktet er i brugsegnet tilstand og sidder korrekt – risiko for uheld!
- Beskadede komponenter såsom hulrem/gjord (f), tandrem (b) eller pude (a) ikke er lappet eller limet og sat i igen - risiko for uheld!

- Sæt dig ikke på polstringen – fare for tryksteder specielt på grund af skraldespænderne (e)!
- Løft ikke kørestolen op over **PELVI.LOC®**- risiko for uheld!
- Pas på at hænderne ikke kommer i klemme mellem hulrem og ramme- og sæderør – fare for kvæstelse!

Brugsbegrænsninger / uønskede bivirkninger

- **PELVI.LOC®** må ikke anvendes, hvis der er i pudeområdet er tryksteder, sår eller andre ikke helede skader – fare for tilskadekomst!
- **PELVI.LOC®** må ikke anvendes ved knoglesvind, glasknogler eller kraftigt nedsat blodgennemstrømning – fare for tilskadekomst!
- Efter rengøring kontrolleres **PELVI.LOC®** korrekte funktion!
- En beskadiget **PELVI.LOC®** skal omgående fornys – fare for uheld!



Pas på:

- **PELVI.LOC®** er ikke en del af tilbageholdelsessystemet for kørestolen og/eller brugere ved transport i et handicapkøretøj.
- Hverken producent eller salgsafdeling kan gøres ansvarlig for skader eller risici, hvad angår produktansvar, som er forårsaget af børn uden opsyn, i sammenhæng med produktet!

Anvendelse

1. Ved brug af **PELVI.LOC®** placeres puderne (a) på låret.



Pas på: Vær opmærksom på, at der ikke er nogen genstande under puderne! Sådan undgås smertende tryksteder.

2. **Vigtigt:** Må ikke lægges på bækken eller spina!
 3. Så føres tandbåndet gennem den relevante skralde. Derved aktiveres det tilhørende skraldespænde (e).
 4. Derefter spændes tandremmen (b) så meget, at der endnu er plads til en flad hånd mellem lår og pude.
 5. Sørg for at, skraldespænderne (e) griber ind i tænderne på tandbæltet!
- Udfør en trækprøve!

Hvis der under brugen af **PELVI.LOC®** sker en utilsigtet løsning af positioneringssystemet, så kan det afhjælpes med en ny spænding.

For at åbne **PELVI.LOC®** aktiveres låsen på skraldespændet (e), og tandbåndet trækkes ud.

- Pas på at puden ikke kommer i klemme mellem egerne på drivhjulet!

Rengøring og desinfektion

- Egnet til vaskemaskine op til 40 grader.
- Kemotermisk desinfektion mulig ved tilsætning af ELTRA 40 til vaskeprogrammet
- Må ikke slynges
- Ikke egnet til tørretumbler

Vedligeholdelse

PELVI.LOC® skal kontrolleres regelmæssigt for skader og funktion.

Reparationer

Defekte **PELVI.LOC®** skal omgående udskiftes.


Bortskaffelse

- Apparatets emballage kan afleveres til genbrug.
- Metaldele kan afleveres til genbrug.
- Kunststofdele kan afleveres til genbrug af kunststoffer.
- Bortskaffelsen kan ske i henhold til de relevante nationale, lovmæssige bestemmelser.
- Spørg venligst by-/kommuneadministrationen om lokale virksomheder med bortskaffelse.

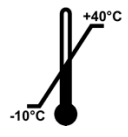



Tekniske data

	XS	S	M	L
Sædebredde (cm)	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46
Pudestørrelse (cm)	17,5 x 9	20 x 11	23 x 13	25,5 x 14
Vægt (g)	220	220	280	280
Teoretisk brudsted (ved ca. kg)	60	60	80	80

Tandbælte str. XS - S	1,9 x 0,2 x 40 cm	Produktet er latexfri 
Tandbælte str. M - L	2,4 x 0,2 x 40 cm	

Opbevarings- og transportbetingelser

	Temperaturområde for langtidsopbevaring fra -10 °C til +40 °C. Kortvarige temperaturspidser, f.eks. under transport, fra -20 °C til +60 °C tolereres godt af materialet og påvirker ikke produktets sikkerhed og ydeevne.
	Beskyttes mod fugt under opbevaring og transport

Garanti

Vi påtager os garantien i henhold til lovbestemmelserne i henhold til lovbestemmelserne. Garantien gælder for materiale- og produktionsfejl. Undtaget herfra er sliddele og dele/komponenter, der er underlagt normalt slid samt skader, der som følge af overdrevet belastning, „forkert brug“, voldsom beskadigelse eller ændring/istandsættelse, der ikke er tilladt. I tilfælde af, at der skal ydes garanti, bedes De kontakte Deres faghandler, hvor De har købt dette produkt. På grund af produktansvar må reparation, vedligeholdelse- og istandsættelsesarbejde kun udføres af en autoriseret faghandler, med anvendelse af originale reservedele.



Producent:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Tlf.: +49 (08373) 987269

Fax: +49 (08373) 987276

Email: info@a2j-intl.com

Internet: www.a2j-intl.com



Dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav i EU's forordning om medicinsk udstyr 2017/745 - Medical Device Regulation (MDR).

Opdateret 01.10.2021

Ret til tekniske ændringer forbeholdes.