



PELVI.LOC® PL-3DSR - XS, -S, -M, -L, -XL



For sikker brug af dette produkt bedes De læse denne montage- og brugsanvisning, inden det tages i brug første gang.



Anvendelsesområde

PELVI.LOC® PL-3DSR hjælper personer med begrænset mobilitet specielt i bækken-positionering i kørestol og aktiv-kørestol og forhindrer, at de glider fremad.

Påtænkt patientgruppe:

- Børn, unge og voksne
- Køn: kvinder og mænd

Modtagelseskontrol

Pak produktet helt ud og kontroller at forsendelsen er komplet og fri for transportskader. Hvis De konstaterer, at der mod forventning er fejl ved forsendelsen, så, skal

1. De reklamere med det samme hos fragtmænd
2. lade skaden / fejlen føres til protokol
3. omgående informere os eller Deres faghandler

Leveringsomfang

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-3DSR -XS, -S, -M, -L, -XL ikke formonteret
- 2) 1 x informationer om online download af montage- og brugsanvisning

Kombination af medicinsk udstyr

Egnet til hjælpemidler, der er beregnet til brug af en bækkenretraktionssele.

Montage



Montage bør udføres af en person med fagkendskab.

1. Pudene (a) placeres altid i lårområdet. – Tandremmen (b) fastgøres til kørestolen.
 - Logoet på pudene kan derefter læses ovenfra!
2. Juster afstanden mellem puderne ved hjælp af hulremmen (d) indstilles. Bækkenretraktionsbæltet strammes ved at aktivere skraldespænderne (e).
 - Leddet på tandremmen skal så sidde midt mellem polstringerne.
 - Tandremmen trækkes maksimalt så langt ud, at der stadig er to tænder fri bag hver skraldespænde(e).
 - Ved indstilling kan velcrobåndet løsnes, og pudene kan slås op (skal kun overholdes ved remme, hvor skraldespændener er dækket.)
3. Efterfølgende fastgøres tandremmen (b) på kørestolens rammerør.
4. Tandremmen (b) strammes lige meget på begge sider og så meget, at der stadig er plads til en flad hånd mellem låg og polstring.
5. Efter behov kan tandremmens ender afkortes halvrundt. Enderne af det afkortede tandbånd afgrates i givet fald – risiko for tilskadekomst! Låseanordningen på begge sider af hul-/tandremmen (f/US) kontrolleres!
6. Det kontrolleres af det sidder godt fast og låseanordningen på begge sider af tandremmen



Brugsanvisning



Sikkerhedsadvarsler

Trods den stabile konstruktion er hulremme, tandremme og puder udsat for en vis slitage. Derfor anbefales det at kontrollere **PELVI.LOC**[®] grundigt hver 3. måned. Her skal man også være opmærksom på, at nitter og skrueforbindelser sidder godt fast!

- Før brug skal man kontrollere, at produktet er i brugsegnet tilstand og sidder korrekt – risiko for uheld!
- Beskadigede komponenter såsom hulrem/gjord (f), tandrem (b) eller pude (a) må ikke være lappet eller limet og sat i igen - risiko for uheld!
- Sæt dig ikke på polstringen – fare for tryksteder specielt på grund af skraldespændet (erne)!
- Løft ikke kørestolen op over **PELVI.LOC**[®] risiko for uheld!
- Pas på at hænderne ikke kommer i klemme mellem hulrem og ramme- og sidderør – fare for kvæstelse!

Brugsbegrænsninger / uønskede bivirkninger

- **PELVI.LOC**[®] må ikke anvendes, hvis der er i polstringsområdet er tryksteder, sår eller andre ikke helede skader – fare for tilskadekomst!
- **PELVI.LOC**[®] må ikke anvendes ved knoglesvind, glasknogler eller kraftigt nedsat blodgennemstrømning – fare for tilskadekomst!
- Efter rengøring kontrolleres det, at **PELVI.LOC**[®] s fungerer korrekt!
- En beskadiget **PELVI.LOC**[®] skal omgående fornyes – fare for uheld!



Pas på:

- **PELVI.LOC**[®] er ikke en del af tilbageholdningssystemet for kørestolen og/eller indsatte ved transport i et handicapkøretøj.
- Hverken producent eller salgsafdeling kan gøres ansvarlig for skader eller risici, hvad angår produktansvar, som er forårsaget af børn uden opsyn, i sammenhæng med produktet!

Anvendelse

1. Til brug af **PELVI.LOC**[®] placeres puderne (a) på lårene.



Pas på: Vær opmærksom på, at der ikke er nogen genstande under puderne. Sådan undgås smertende tryksteder.

2. **Vigtigt:** Må ikke placeres på bækken eller spina!
 3. Så føres tandremmen (b) gennem den aktuelle skralde. Derved aktiveres den tilhørende skaldespænde (e).
 4. Derefter spændes tandremmen (b) så meget, at der endnu er plads til en flad hånd mellem lår og pude.
 5. Sørg for at, snapperne på skaldespænderne (e) griber ind i tænderne på tandremmen!
- Udfør en trækprøve!

Hvis der under brugen af **PELVI.LOC**[®] sker en utilsigtet løsning af positioneringssystemet, så kan det udbedres ved at spænde det igen.

For at åbne **PELVI.LOC[®]** aktiveres skaldespændet (e), og tandremmen trækkes ud.

- Pas på at puden ikke kommer i klemme mellem egerne på drivhjulet!

Rengøring og desinfektion

- Egnet til vaskemaskine op til 40 grader.
- Kemotermisk desinfektion mulig ved tilsætning af ELTRA 40 til vaskeprogrammet
- Må ikke slynges.
- Ikke egnet til tørretumbler

Vedligeholdelse

PELVI.LOC[®] skal kontrolleres regelmæssigt for skader og funktion.

Reparationer

Defekte **PELVI.LOC**[®] skal omgående udskiftes.


Bortskaffelse

- Apparatets emballage kan afleveres til genbrug.
- Metaldele kan afleveres til genbrug.
- Kunststofdele kan afleveres til genbrug af kunststoffer.
- Bortskaffelsen kan ske i henhold til de relevante nationale, lovmæssige bestemmelser.
- Spørg venligst by-/kommuneadministrationen om lokale virksomheder med bortskaffelse.

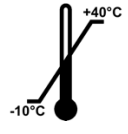



Tekniske data

	XS	S	M	L	XL
Sædebredde (cm)	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	44 - 52
Pudestørrelse (cm)	18 x 7	21 x 8	25,5 x 8	26,5 x 8,5	28,5 x 9
Vægt (g)	220	220	280	280	300
Teoretisk brudsted (ved ca. kg)	60	60	80	80	80

Tandrem str. XS - S	1,9 x 0,2 x 40 cm	Produktet er latexfri 
Tandrem str. M - L - XL	2,4 x 0,2 x 40 cm	

Opbevarings- og transportbetingelser

	Temperaturområde for langtidsopbevaring fra -10 °C til +40 °C. Kortvarige temperaturspidser, f.eks. under transport, fra -20 °C til +60 °C tolereres godt af materialet og påvirker ikke produktets sikkerhed og ydeevne.
	Beskyttes mod fugt under opbevaring og transport

Garanti

Vi påtager os garantien i henhold til lovbestemmelserne i henhold til lovbestemmelserne. Garantien gælder for materiale- og produktionsfejl. Undtaget herfra er sliddele og dele/komponenter, der er underlagt normalt slid samt skader, der som følge af overdrevet belastning, „forkert brug“, voldsom beskadigelse eller ændring/istandsættelse, der ikke er tilladt. I tilfælde af, at der skal ydes garanti, bedes De kontakte Deres faghandler, hvor De har købt dette produkt. På grund af produktansvar må reparation, vedligeholdelse- og istandsættelsesarbejde kun udføres af en autoriseret faghandler, med anvendelse af originale reservedele.



Producent:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Tlf.: +49 (08373) 987269

Fax: +49 (08373) 987276

Email: info@a2j-intl.com

Internet: www.a2j-intl.com

Opdateret 01.10.2021



Dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav i EU's forordning om medicinsk udstyr 2017/745 - Medical Device Regulation (MDR).

Ret til tekniske ændringer foreholdes.