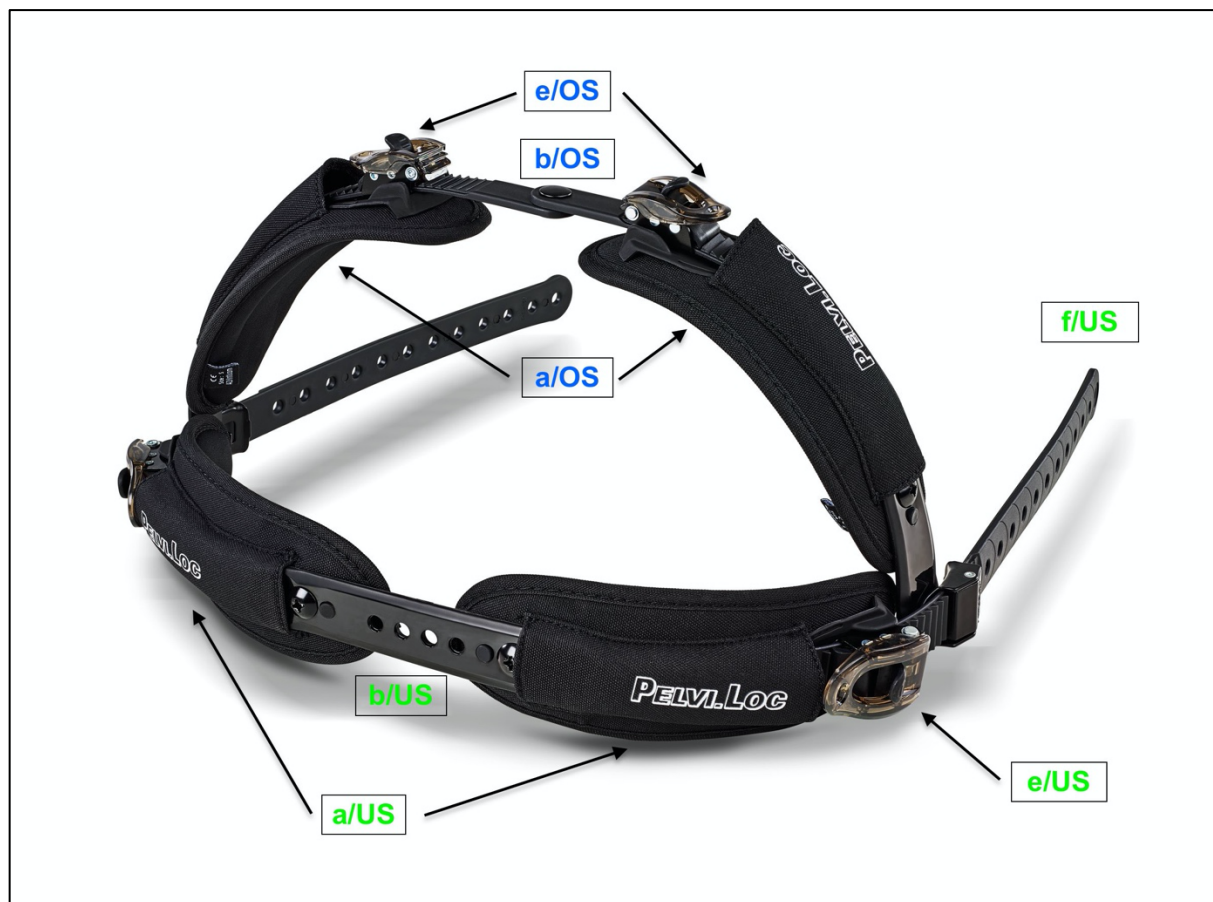




**PELVI.LOC®**

**Genuframe**

**PL-GF - XXS, - XS, - S, - M, - L, - XL**



For sikker brug af dette produkt bedes De læse denne montage- og brugsanvisning, inden det tages i brug første gang.



### Anvendelsesområde

**PELVI.LOC®** Genuframe - PL-GF hjælper personer med begrænset mobilitet specielt i bækken- lår- positionering i kørestol og aktiv-kørestol og forhindrer, at de glider fremad.

### Påtænkt patientgruppe:

- Børn, unge og voksne
- Køn: kvinder og mænd

### Modtagelseskontrol

Pak produktet helt ud og kontroller at forsendelsen er komplet og fri for transportskader. Hvis De konstaterer, at der mod forventning er fejl ved forsendelsen, så, skal

1. De reklamere med det samme hos fragtmanden
2. lade skaden / fejlen føres til protokol
3. omgående informere os eller Deres faghandler

## Leveringsomfang

- 1) 1 x **PELVI.LOC**<sup>®</sup> Genuframe lårisele -XXS, -XS, -S, -M, -L, -XL formonteret
- 2) 1 x **PELVI.LOC**<sup>®</sup> Genuframe underbenssele -XXS, -XS, -S, -M, -L, -XL formonteret
- 3) 1 x informationer om online download af montage- og brugsanvisning

## Kombination af medicinsk udstyr

Egnet til hjælpemidler, der er beregnet til brug af en bækkenretraktionssele.

## Montage af underbenssele



Montage bør udføres af en person med fagkendskab.

Montage af **PELVI.LOC**<sup>®</sup> Genuframe underbenssele kan sammenlignes med PL-UG.

1. Puderne (**a/US**) placeres altid i underbensområde (under tibia eller fibulahovedet). Hul-/tandrem (**f/US**) skal derved ligge udvendigt.
  - **PELVI.LOC**<sup>®</sup> logoet på underbenspuderne skal derefter være læsbart forfra!
2. Juster afstanden mellem puderne ved hjælp af hulremmen (**b/US**).
3. Hul-/tandremmen (**f/US**) fastgøres på rammerøret på kørestollen.
4. Hul-/tandremmen (**f/US**) Spændes lige meget på begge sider og så meget, at der stadig er plads til en flad hånd mellem lår og pude.
5. Efter behov kan tandremmens ender afkortes halvrundet. Enderne af den afkortede tandrem afgrates i givet fald – risiko for tilskadekomst!
6. Låseanordningen på begge sider af hul- /tandremmen (**f/US**) kontrolleres!

## Montage af lårisele

**PELVI.LOC**<sup>®</sup> Genuframe lårisele kan sammenlignes med PL-2DB.

7. Polstringen (**a/OS**) lægges altid i lårområdet – tandremmen (**b/OS**) ligger derved opad.
  - **PELVI.LOC**<sup>®</sup> på lårpolsstringen er derefter læsbart fra oven!
8. Puderens afstand indstilles med tandremmen (**b/OS**) ved aktivering af skraldepænderne på lårremmen. (**e/OS**).
  - Leddet på tandremmen (**b/OS**) skal så sidde midt mellem puderne.
  - Tandbåndet trækkes maksimalt så langt ud, at der stadig er to tænder fri bag hvert skraldepænde (**e/OS**).



## Brugsanvisning



## Sikkerhedsadvarsler

Trods den stabile konstruktion er hulremme, tandremme og puder udsat for en vis slitage. Derfor anbefales det at kontrollere **PELVI.LOC**<sup>®</sup> grundigt hver 3. måned. Her skal man også være opmærksom på, at nitter og skrueforbindelser sidder godt fast!

- Før brug skal man kontrollere, at produktet er i brugsegnet tilstand og sidder korrekt – risiko for uheld!
- Beskadigede komponenter såsom hulrem/selebælte (f), tandrem b) eller pude (a) må ikke være lappet eller limet og sat i igen - risiko for uheld!
- Sæt dig ikke på puderne – fare for tryksteder specielt på grund af skaldespænderne!
- Løft ikke kørestolen op over **PELVI.LOC**<sup>®</sup> risiko for uheld!
- Pas på at hænderne ikke kommer i klemme mellem hulrem og ramme- og sæderør – fare for kvæstelse!

## Brugsbegrænsninger / uønskede bivirkninger

- **PELVI.LOC**<sup>®</sup> må ikke anvendes, hvis der er i pudeområdet er tryksteder, sår eller andre ikke helede skader – fare for tilskadekomst!
- **PELVI.LOC**<sup>®</sup> må ikke anvendes ved knoglesvind, glasknogler eller kraftigt nedsat blodgennemstrømning – fare for tilskadekomst!
- Efter rengøring kontrolleres det, at **PELVI.LOC**<sup>®</sup> fungerer korrekt!
- En beskadiget **PELVI.LOC**<sup>®</sup> skal omgående fornys – fare for uheld!



### Pas på:

- **PELVI.LOC**<sup>®</sup> er ikke en del af tilbageholdelsessystemet for kørestolen og/eller indsatte ved transport i et handicapkøretøj.
- Hverken producent eller salgsafdeling kan gøres ansvarlig for skader eller risici, hvad angår produktansvar, som er forårsaget af børn uden opsyn, i sammenhæng med produktet!

1. Ved brug af **PELVI.LOC**<sup>®</sup> placeres puderne(a) på underbenet.

## Anvendelse

1. Til brug af **PELVI.LOC**<sup>®</sup> placeres puderne (a) på lårene og underbenene.



**PAS PÅ:** Vær opmærksom på, at der ikke er nogen genstande under puderne. Sådan undgås smertende tryksteder.

2. Så føres tandremmen (**f/US**) gennem den aktuelle skralde. Derved aktiveres den tilhørende skaldespænde (**e/US**).
3. Derefter spændes tandremmen (**f/US**) så meget, at der endnu er plads til en flad hånd mellem lår og pude.
4. Sørg for at, skaldespænderne (**e/US**) griber ind i tænderne på tandremmen!
  - Udfør en trækprøve!

Hvis der under brugen af **PELVI.LOC®** sker en utilsigtet løsning af positioneringssystemet, så kan det udbedres ved at spænde det igen.

**For at åbne PELVI.LOC®** aktiveres skraldespændet (**e/US**), og tandremmen trækkes ud.

- Pas på at puden ikke kommer i klemme mellem egerne på drivhjulet!

### Rengøring og desinfektion

- Egnede til vaskemaskine op til 40 grader.
- Kemotermisk desinfektion mulig ved tilsætning af ELTRA 40 til vaskeprogrammet
- Må ikke slynges.
- Ikke egnede til tørretumbler

### Vedligeholdelse

**PELVI.LOC®** skal kontrolleres regelmæssigt for skader og funktion.

### Reparationer

Defekte **PELVI.LOC®** skal omgående udskiftes.


### Bortskaffelse

- Apparatets emballage kan afleveres til genbrug.
- Metaldele kan afleveres til genbrug.
- Kunststofdele kan afleveres til genbrug af kunststoffer.
- Bortskaffelsen kan ske i henhold til de relevante nationale, lovmæssige bestemmelser.
- Spørg venligst by-/kommuneadministrationen om lokale virksomheder med bortskaffelse.



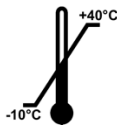

### Tekniske data

	<b>XXS</b>	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>
<b>Knæbredde (cm)</b>	12 – 20	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	44 - 52
<b>Pudestørrelse (cm)</b>	12 x 7	18 x 7	21 x 8	25,5 x 8	26,5 x 8,5	28,5 x 9
<b>Vægt (g)</b>	200	220	220	280	280	300
<b>Teoretisk brudsted (ved ca. kg)</b>	60	60	60	80	80	80

<b>Tandbælte str. XXS - XS - S</b>	1,9 x 0,2 x 17,0 cm	Produktet er latexfri 
<b>Tandbælte str. M - L - XL</b>	2,4 x 0,2 x 17,0 cm	

**Vigtig anvisning: Knæbredde, ikke sædebredde!**

## Opbevarings- og transportbetingelser

	Temperaturområde for langtidsopbevaring fra -10 °C til +40 °C. Kortvarige temperaturspidser, f.eks. under transport, fra -20 °C til +60 °C tolereres godt af materialet og påvirker ikke produktets sikkerhed og ydeevne.
	Beskyttes mod fugt under opbevaring og transport

## Garanti

Vi påtager os garantien i henhold til lovbestemmelserne i henhold til lovbestemmelserne. Garantien gælder for materiale- og produktionsfejl. Undtaget herfra er sliddele og dele/komponenter, der er underlagt normalt slid samt skader, der som følge af overdrevet belastning, „forkert brug“, voldsom beskadigelse eller ændring/istandsættelse, der ikke er tilladt. I tilfælde af, at der skal ydes garanti, bedes De kontakte Deres faghandler, hvor De har købt dette produkt. På grund af produktansvar må reparation, vedligeholdelse- og istandsættelsesarbejde kun udføres af en autoriseret faghandler, med anvendelse af originale reservedele.



### Producent:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Tlf: +49 (08373) 987269

Fax: +49 (08373) 987276

Email: [info@a2j-intl.com](mailto:info@a2j-intl.com)

Internet: [www.a2j-intl.com](http://www.a2j-intl.com)



Dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav i EU's forordning om medicinsk udstyr 2017/745 - Medical Device Regulation (MDR).

Opdateret 01.10.2021

Ret til tekniske ændringer forbeholdes