


PELVI.LOC TL-3DSR -XS-S-M-L / TL-W -S-M-L-XL

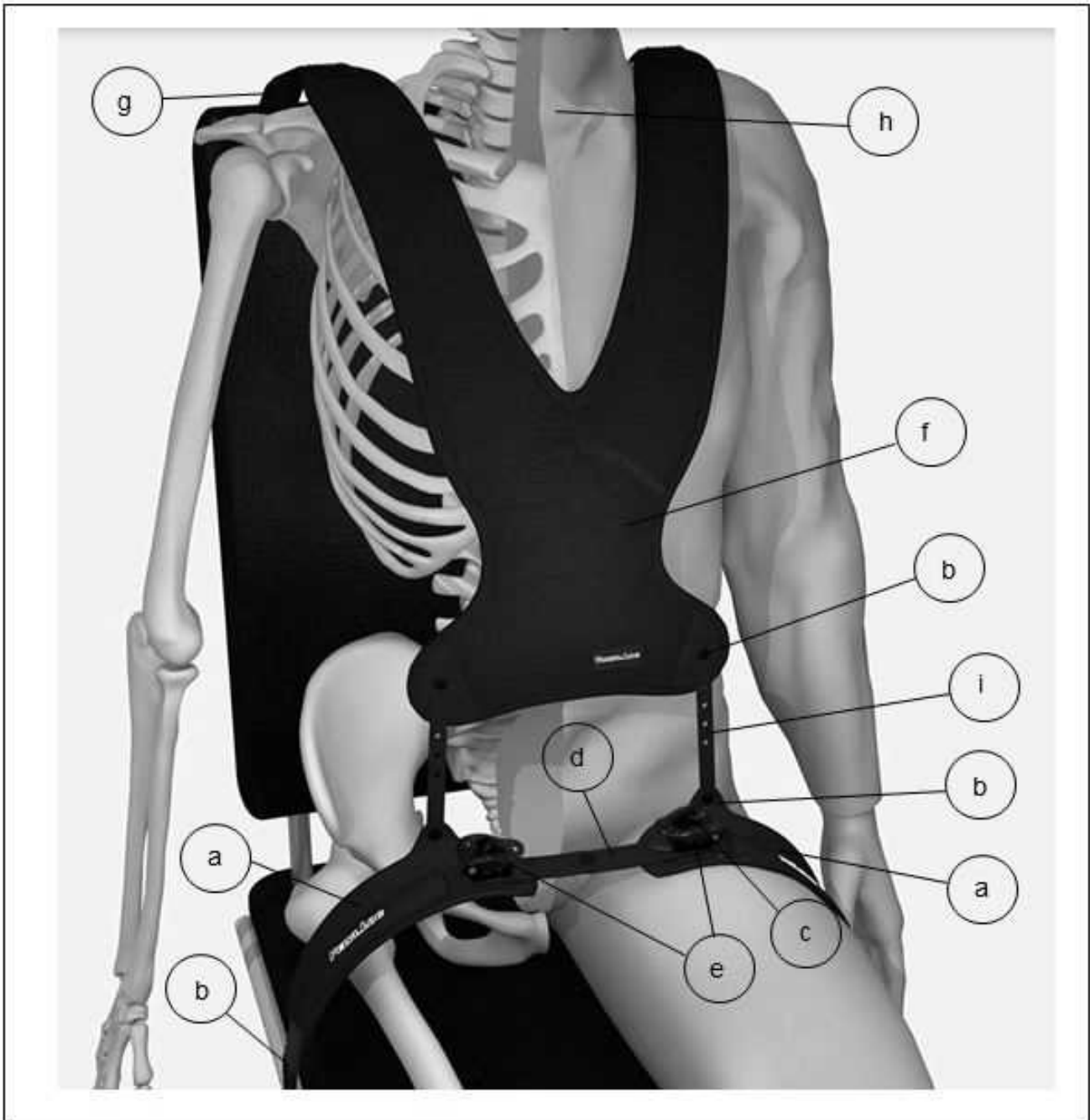

Lees a.u.b. voor veilig gebruik van dit product deze montage- en gebruiksaanwijzing vóór het eerste gebruik en neem deze in acht.

Toepassingsgebied

Deze Torso.Loc TL-3DSR in combinatie met TL-W dient voor betere positionering en bekkenretractie voor personen met beperkte mobiliteit op een zitvlak, bijv. rolstoel, zitplaat, therapiestoel, rehabilitatiebuggy

Beoogde patiëntengroep

- Kinderen, jeugd en volwassenen
- Geslacht: vrouwelijk en mannelijk

Controle bij ontvangst

Pak het product volledig uit en controleer de levering op volledigheid en transportschade. Indien u vaststelt dat de levering onverwachts een fout heeft, dan:

1. Dient u meteen een klacht in bij de transporteur
2. Laat u de schade/fout optekenen
3. Stelt u ons of uw speciaalzaak per direct op de hoogte

Leveringsomvang

- 1) 1 x TL-3DSR niet voorgesamonteerd
- 2) 1 x TL-W niet voorgesamonteerd
- 3) 1 x informatie over online downloaden van de montage- en gebruiksaanwijzing/instructie

Combinatie van medische hulpmiddelen

Geschikt voor hulpmiddelen die bedoeld zijn voor het gebruik van een bekkengordel in combinatie met een positioneringsvest ter ondersteuning van het bovenlichaam.



Gebruiksdoel

Deze Torso.Loc TL-3DSR in combinatie met Torso.Loc TL-W dient voor personen met een beperkte mobiliteit, speciaal voor de positionering van bekken, bovenbenen en bovenlichaam, voorkomt naar voren schuiven van het bekken en naar voren kantelen van het bovenlichaam.



Montage

- De montage dient te worden uitgevoerd door een persoon met vakkennis.
1. Plaats de kussens (a) allebei tegen de bovenbenen. – De getande band (b) wordt aan de rolstoel bevestigd.
 - Het logo op het kussen is daarna van voren leesbaar!
 2. Stel de afstand van de kussens via de geperforeerde riem (d) in. Door middel van de ratelgespen (e) kunt u de bekkengordel strak zetten.
 - Het scharnier van de geperforeerde riem moet zich dan in het midden tussen de kussens bevinden.
 - Trek de getande band er max. zover uit, dat nog twee tanden achter elke ratelgesp (e) vrij zijn.
 1. Bevestig daarna de getande riem (b) aan de framebuis van de rolstoel (neem montage-instructie in acht).
 2. Span de getande band (b) aan beide kanten gelijk en zover dat nog ruimte genoeg overblijft om een vlakke hand tussen bovenbeen en kussen te steken.
 3. Indien gewenst kunnen de uiteinden van de getande band halfrond op lengte worden gesneden. Werk de uiteinden van de afgesneden getande band evt. af. – Risico op letsell!
 4. Controleer of de getande band goed vastzit en ook de vergrendeling aan beide kanten van de getande band!
 5. Plaats het vest (f) op het bovenlichaam. – De gordelband (g) wordt aan beide kanten aan de rolstoel bevestigd (met schroeven op met een sluitnok 25 mm).
 - Het logo op het kussen is daarna van voren leesbaar!
 6. Stel de afstand van het neopreenvest tot de hals (h) zo in met de gordelband (g), dat er geen risico op wurging bestaat.
 7. Schroef de twee geperforeerde riemen (i) vast aan TL-3DSR en TL-W. Kort overtollige stukken van de geperforeerde riemen eventueel in. Door het instellen van de geperforeerde riemen (i) wordt het neopreenvest strakgetrokken.
 - Het neopreenvest moet in het midden van de contouren van het lichaam passen.
 8. U kunt het neopreenvest met de gordelband (g) licht naspannen en positioneren.
 9. Span de schouderband (g) aan beide kanten gelijk en zover dat nog ruimte genoeg overblijft om een vlakke hand tussen hals en kussen te steken (risico op rode plekken op de huid).
 10. Indien gewenst kunnen de uiteinden van de gordelband (g) op lengte worden gesneden.



Gebruiksaanwijzing



Veiligheidsinstructies

Ondanks de stabiele constructie zijn onderdelen zoals geperforeerde riemen, gordelbanden, getande banden en kussens onderhevig aan slijtage. Daarom raden wij u aan om de Torso.Loc om de 6 maanden grondig te controleren. Daarbij moet u er ook op letten of klinknagel- en schroefverbindingen nog goed vastzitten!

- Overtuig u vóór gebruik ervan dat het product in goede staat van gebruik verkeert en ook correct zit. – Risico op ongevallen!
- Probeer beschadigde onderdelen zoals gordelband/geperforeerde riem (i), getande band (b), kussens (a) of vest (f) niet zelf te repareren door ze bijv. te plakken en weer in te zetten. – Risico op ongevallen!
- Ga niet op de kussens zitten! Risico op drukplaatsen door de ratels (e)!
- Til de rolstoel niet op via de Torso.Loc. Risico op ongevallen!
- Let erop dat handen niet tussen geperforeerde riem en frame- of zitbuis komen te zitten. Risico op ingeklemd raken!

Gebruiksbeperkingen/ongewenste bijwerkingen

- Gebruik de Torso.Loc niet als er in het gebied van de kussens drukplaatsen, wonden of ander, niet geheeld letsel zit/zitten. – Risico op letsel!
- Gebruik de Torso.Loc niet bij botverlies, brozebottenziekte of ernstige doorbloedingsstoornissen. – Risico op letsel!
- Stel zeker dat de Torso.Loc na de reiniging nog correct werkt!
- Een beschadigde Torso.Loc moet meteen worden vervangen. – Risico op ongevallen!



Let op:

De Torso.Loc maakt geen deel uit van het beveiligingssysteem voor de rolstoel en/of inzittenden bij transport in een invalidenwagen.

- De fabrikant noch het verkooppunt kunnen, in de zin van de productgarantie, aansprakelijk worden gesteld voor schade of risico's die, in samenhang met het product, veroorzaakt worden doordat men kinderen niet in de gaten heeft gehouden!

Gebruik

1. Voor gebruik van de Torso.Loc legt u de kussens (a) op de bovenbenen.



Let op:

- let erop dat er zich geen voorwerpen onder de kussens bevinden! Zo voorkomt u pijnlijke drukplaatsen.
2. Leid vervolgens de getande band (b) door de betreffende ratel. Gebruik daarvoor de desbetreffende ratelgesp (e).
3. Span de getande band (b) daarna zover, dat nog ruimte genoeg overblijft om een vlakke hand tussen bovenbeen en kussens te steken.
4. Zorg ervoor dat de snappers (c) in de tanden van de getande band grijpen!
 - Trek eraan om te testen!

Gebruik voor het openen van de Torso.Loc de snapper (c) en trek de getande band eruit.

- Let erop dat de kussens niet tussen de spaken van het aandrijfwiel komen!

Reiniging en desinfectie

- Geschikt voor de wasmachine tot 40 graden.
- Chemothermische desinfectie mogelijk door ELTRA 40 bij de was te doen.
- Niet centrifugeren.
- Niet geschikt voor de droger.

Onderhoud

De Torso.Loc dient regelmatig op beschadiging en functionering te worden gecontroleerd.

Reparatie

Vervang een defecte Torso.Loc meteen.

Afvalverwijdering

- De apparaatverpakking is recyclebaar.
- De metalen delen zijn recyclebaar.
- Kunststof delen zijn recyclebaar.
- Afvalverwijdering dient te geschieden volgens de betreffende nationale wettelijke bepalingen.
- Vraag uw stadsbeheer of gemeente naar de plaatselijke afvalverwijderingsbedrijven.

Technische gegevens TL-3DSR

Zitbreedte:	XS	16 tot 24 cm
Kussenmaat:	XS	18x7 cm
Gewicht:	XS	Ca. 220 g
Breekpunt:	XS	bij ca. 60 kg

Zitbreedte:	S	20 tot 32 cm
Kussenmaat:	S	21x8 cm
Gewicht:	S	Ca. 220 g
Breekpunt:	S	bij ca. 60 kg


Zitbreedte:	M	30 tot 40 cm
Kussenmaat:	M	25,5 x 8 cm
Gewicht:	M	Ca. 280 g
Breekpunt:	M	bij ca. 80 kg

Zitbreedte:	L	36 tot 46 cm
Kussenmaat:	L	26,5x8,5 cm
Gewicht:	L	Ca. 280 g
Breekpunt:	L	bij ca. 80 kg

Getande band Mt.:	1,9 x 0,2 x 40 cm
XS-S	
Getande band Mt.:	2,4 x 0,2 x 40 cm
M-L	

Technische gegevens TL-W

Artikelnr.	A	B	C	D	E	F
TL-W-S	31	22	12	16	4	12
TL-W-M	38	29	16	19	5	13
TL-W-L	47	37	19	22	6	14
TL-W-XL	55	45	24	26	6,5	17

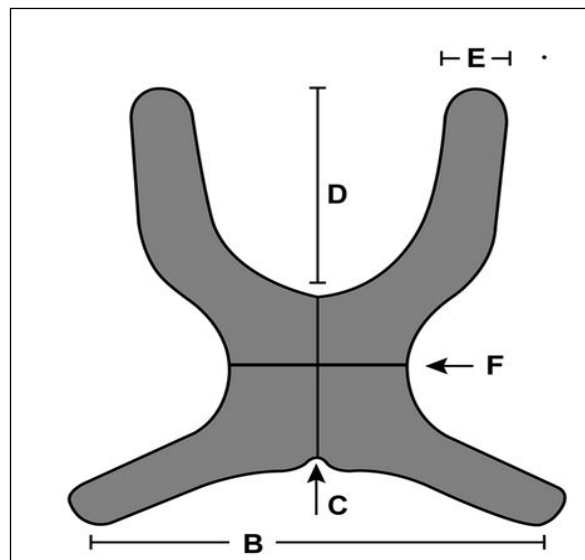

Product is latexvrij.



Garantie

Wij zijn aansprakelijk voor dit product conform de wettelijke bepalingen. Dit omvat materiaal- en verwerkingsfouten. Daarvan uitgesloten zijn slijtagedelen en onderdelen/bouwgroepen die onderhevig zijn aan normale slijtage, evenals schade die ontstaat door te hoge belasting, "niet beoogd gebruik", beschadiging door geweld of niet toegestane wijziging/reparatie. In

garantiegevallen wordt u verzocht contact op te nemen met uw speciaalzaak waar u dit product heeft gekocht.

Omwille van de productgarantie mogen reparatie-, onderhouds- en instandhoudingswerkzaamheden alleen worden uitgevoerd door geautoriseerde specialisten, met gebruik van de originele reserveonderdelen.



Fabrikant:

A2J GmbH
Am Fuchsberg 13
D-87452 Altusried
Telefoon: +49 (08373)
987269
Fax: +49 (08373) 987276
E-mail: info@a2j-intl.com
Internet: www.a2j-intl.com



Dit product is in
overeenstemming met
de belangrijkste vereisten
van de EG-richtlijn 93/42/EWG
voor medische hulpmiddelen.

Versie 01122018 Technische wijzigingen
voorbehouden.