




## **PELVI.LOC® PL-3DWP - XS, - S, -M, -L**



W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania produktu należy przed jego pierwszym użyciem przeczytać niniejszą instrukcję montażu i obsługi i stosować się do niej.

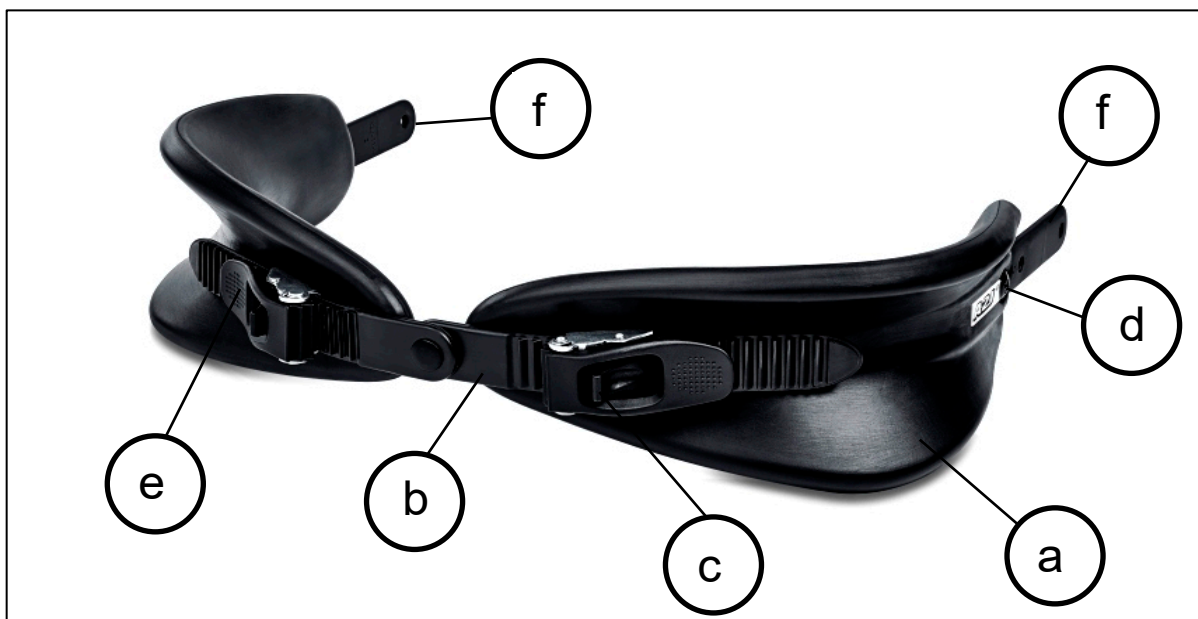

### **Zakres stosowania**

Wodoodporny **PELVI.LOC®** PL-3DWP służy do pozycjonowania i stabilizowania miednicy na siedzeniu u osób o ograniczonej sprawności ruchowej, np. siedzących na wózku prysznicowym, krześle kąpielowym, wózku inwalidzkim, muszli, krześle terapeutycznym, wózku rehabilitacyjnym, sprzęcie sportowym.

### **Przewidziana grupa pacjentów:**

- dzieci, młodzież i dorośli
- płeć: kobiety i mężczyźni

### **Kontrola podczas odbioru**

Całkowicie rozpakuj produkt i sprawdź przesyłkę pod kątem kompletności i uszkodzeń transportowych. Jeśli okaże się, że przesyłka ma wadę, wówczas:

1. Należy niezwłocznie złożyć reklamację firmie przewozowej.
2. Należy odnotować uszkodzenia/braki.
3. Należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nas lub specjalistycznego sprzedawcę.

### **Zakres dostawy**

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-3DWP -XS, -S, -M, -L wstępnie zmontowana
- 2) 1 x informacje na temat pobierania instrukcji montażu i obsługi online

## Łączenie wyrobów medycznych

Można używać z urządzeniami wspomagającymi stosowanymi z pasem do stabilizacji miednicy.

### Montaż



Montaż powinna przeprowadzić osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę:

1. Umieścić podkładki (a) w obszarze miednicy/zgięcia bioder. - Opaska zębata (b) powinna być na górze.
  - Powinno się dać przeczytać logo umieszczone na podkładce po lewej stronie.
2. Wyregulować odległość pomiędzy podkładkami za pomocą opaski zębatej (b), uruchamiając klamry zapadkowe (e).
  - Złącze opaski zębatej należy następnie umieścić centralnie pomiędzy podkładkami.
  - Wyciągnąć maksymalnie opaskę zębatą tak, aby za każdą klamrą zapadkową (c) pozostały jeszcze dwa wolne zęby.
3. Następnie przymocować perforowane pasy (f) do rury ramy wózka inwalidzkiego.
4. Opaskę zębatą (b) naciągać równomiernie po obu stronach tak, aby pomiędzy udem a podkładką pozostało miejsce na dłoń włożoną na płasko.
5. W razie potrzeby można przyciąć końce opaski zębatej do kształtu półkolistego. W razie potrzeby należy usunąć zadziory z końcówek przyciętych opasek zębatych. – Niebezpieczeństwo zranienia!
6. Sprawdzić ściśle dopasowanie i mechanizm blokujący po obu stronach opaski zębatej!



### Instrukcja obsługi



### Instrukcje bezpieczeństwa

Pomimo stabilnej konstrukcji elementy takie jak pasy perforowane, opaski zębate i podkładki są narażone na zużycie. Dlatego zaleca się dokładne sprawdzanie **PELVI.LOC®** PL-3DWP co 3 miesiące. Upewnić się, czy nity i połączenia śrubowe są mocno osadzone!

- Przed użyciem należy upewnić się, czy produkt jest w stanie zdatnym do użytku i czy jest prawidłowo osadzony - ryzyko wypadku!
- Nie naprawiać ani nie kleić uszkodzonych elementów, takich jak pas perforowany (f), opaska zębata (b) lub podkładka (a) i nie używać ich ponownie - ryzyko wypadku!
- Nie siadać na podkładkach - niebezpieczeństwo powstania odcisków spowodowanych naciskiem zwłaszcza klamer zapadkowych (c)!
- Nie należy podnosić wózka powyżej **PELVI.LOC®** PL-3DWP- ryzyko wypadku!
- Upewnić się, czy ręce nie znajdują się między pasem perforowanym a rurą ramy lub rurą pod siedziskiem - niebezpieczeństwo zgniecenia!

## Ograniczenia w stosowaniu / działania niepożądane

- Nie należy używać **PELVI.LOC**<sup>®</sup> PL-3DWP, jeśli w obszarze podkładek znajdują się odciski, rany lub inne niezabliźnione urazy - niebezpieczeństwo obrażeń!
- Nie należy używać **PELVI.LOC**<sup>®</sup> PL-3DWP w przypadku osteoporozy, łamliwości kości lub poważnych zaburzeń krążenia - niebezpieczeństwo obrażeń!
- Po oczyszczeniu należy zapewnić prawidłowe działanie **PELVI.LOC**<sup>®</sup> PL-3DWP!
- Uszkodzony **PELVI.LOC**<sup>®</sup> PL-3DWP należy natychmiast wymienić - ryzyko wypadku!



### Uwaga:

- **PELVI.LOC**<sup>®</sup> PL-3DWP nie jest częścią systemu przytrzymującego wózek inwalidzki i/lub pasażera podczas transportu w pojeździe transportowym dla osób niepełnosprawnych.
- W zakresie odpowiedzialności za produkt ani producent, ani dystrybutor nie odpowiadają za ryzyko lub szkody spowodowane przez dzieci pozostające bez nadzoru!

## Zastosowanie

1. Aby użyć **PELVI.LOC**<sup>®</sup> PL-3DWP, podkładki (a) należy umieścić na udach.



**Uwaga:** Należy sprawdzić czy pod podkładka nie ma przedmiotów! W ten sposób unika się bolesnych odcisków.

2. Następnie przepuść opaskę zębatą (b) przez odpowiednią zapadkę. W tym celu należy uruchomić odpowiednią klamrę zapadkową (e).
3. Następnie naciągać opaskę zębatą (b) do momentu, aż pomiędzy udem a podkładką będzie jeszcze miejsce na włożenie dłoni na płasko.
4. Upewnić się, czy zapadki (c) współpracują z zębami opaski zębatej!
  - Przeprowadzić próbę rozciągania!

Jeśli podczas zakładania **PELVI.LOC**<sup>®</sup> PL-3DWP dojdzie do niezamierzonego poluzowania systemu pozycjonowania, można ponownie napiąć system pozycjonowania.

**Aby otworzyć PELVI.LOC**<sup>®</sup> PL-3DWP należy uruchomić zapadkę (c) i wyciągnąć opaskę zębatą.

- Upewnić się, czy podkładki nie znajdują się pomiędzy szprychami koła napędowego!

## Czyszczenie i dezynfekcja

- Dezynfekcja poprzez wycieranie z zastosowaniem IZOPROPANOLU 70%
- Nie używać rozpuszczalników takich jak aceton i benzyna!

## Konserwacja

**PELVI.LOC**<sup>®</sup> PL-3DWP należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń i działania.

## Naprawy

Uszkodzony **PELVI.LOC**<sup>®</sup> należy natychmiast wymienić.

## Utylizacja

- Opakowanie sprzętu nadaje się do ponownego użytku.
- Części metalowe nadają się do recyklingu złomu.
- Części plastikowe nadają się do recyklingu tworzyw sztucznych.
- Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami.
- Zwrócić się do władz miasta/gminy z zapytaniem o lokalne firmy zajmujące się utylizacją odpadów.

### Dane techniczne

	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>
<b>Szerokość siedziska (cm)</b>	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46
<b>Wielkość podkładki (cm)</b>	18 x 11	20 x 12	23 x 13,5	27,0 x 13,5
<b>Waga (g)</b>	200	220	260	320
<b>Rozerwanie (przy ok. kg)</b>	60	60	80	80

<b>Rozmiar opaski zębatej XS - S</b>	1,9 x 0,2 x 17,0 cm
<b>Rozmiar opaski zębatej M - L</b>	2,4 x 0,2 x 17,0 cm
<b>Materiał</b>	EVA o zamkniętych porach

Produkt nie zawiera lateksu



### Gwarancja

Na produkt udzielamy gwarancji zgodnie z przepisami prawa. Dotyczy to również wad materiałowych i produkcyjnych. Gwarancji nie podlegają części i podzespoły zużywające się, które podlegają normalnemu zużyciu, jak również uszkodzenia wynikające z nadmiernej eksploatacji, "użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem", uszkodzeń mechanicznych lub niedozwolonych modyfikacji/napraw. W przypadku reklamacji gwarancyjnej należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.

Ze względu na odpowiedzialność za produkt, prace naprawcze, konserwacyjne i nadzór mogą wykonywać wyłącznie autoryzowani sprzedawcy przy użyciu oryginalnych części zamiennych.



#### **Producent:**

A2J Ltd  
 Am Fuchsberg 13  
 D-87452 Altusried  
 Tel: +49 (08373) 987269  
 Faks: +49 (08373) 987276  
 e-mail: [info@a2j-intl.com](mailto:info@a2j-intl.com)  
 Internet [www.a2j-intl.com](http://www.a2j-intl.com)



Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami dyrektywy WE 93/42/EWG dotyczącymi wyrobów medycznych.

Stan na dzień 2019-05-01

Zastrzega się możliwość zmian technicznych