




PELVI.LOC® PL-3DA - XS, -S, -M, -L



Per usare questo prodotto in sicurezza, prima del primo utilizzo leggere e osservare le presenti istruzioni per il montaggio e l'uso

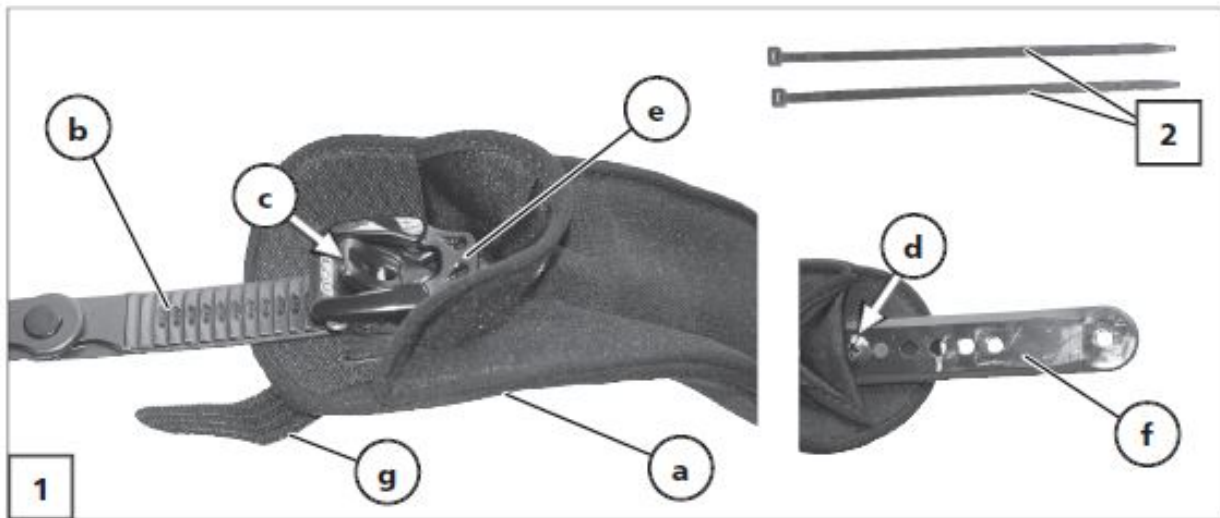

Ambito d'uso

Il **PELVI.LOC®** PL-3DA serve alle persone con mobilità ridotta, specificatamente per il posizionamento del bacino nella sedia a rotelle e nella sedia a rotelle attiva, e impedisce di scivolare in avanti.

Gruppi di pazienti target:

- Bambini, giovani e adulti
- Sesso: femminile e maschile

Controllo fornitura

Disimballare completamente il prodotto e verificare l'integrità dell'oggetto di fornitura e la presenza di danni di trasporto. Qualora si dovesse riscontrare inaspettatamente un difetto, procedere come segue:

1. presentare tempestivamente un reclamo allo spedizioniere
2. far protocollare il danno / difetto
3. informare tempestivamente noi o il proprio rivenditore specializzato

Oggetto di fornitura

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-3DA- XS, -S, -M, -L premontato
- 2) 2 x fascette per cavi 7,8 mm
- 3) 1 x informazioni per il download elettronico delle istruzioni per il montaggio e l'uso

Montaggio



Il montaggio deve essere eseguito da una persona dotata delle necessarie competenze tecniche

1. Disporre ciascun cuscinetto (a) rispettivamente nell'area del bacino e dell'articolazione dell'anca. – La cinghia dentata (b) deve essere disposta in alto.
 - Il logo sul cuscinetto sarà dunque visibile da davanti!
2. Impostare la distanza dei cuscinetti con la cinghia dentata (b), azionando la fibbia a cricchetto (e).
 - La giuntura della cinghia dentata deve trovarsi al centro tra i due cuscinetti.
 - Estrarre la cinghia dentata massimo fino ad avere due denti liberi dietro al giunto a scatto (c).
 - Per la regolazione è possibile togliere la chiusura a strappo (g) e aprire il cuscinetto (pertinente solo per le cinture con le fibbie a cricchetto coperte)
3. Fissare successivamente le cinghie forate/cinghie (f) al tubo del telaio della sedia a rotelle
4. Tendere la cinghia dentata (b) su entrambi i lati in modo uguale e in modo che resti lo spazio sufficiente per una mano aperta tra la coscia e il cuscinetto.
5. Se necessario, è possibile tagliare a emiciclo le estremità della cinghia dentata. Eventualmente sbavare le estremità della cinghia dentata tagliata. –Pericolo di lesioni!
6. Verificare che la cinghia dentata sia ben salda e bloccata su entrambi i lati!



Istruzioni per l'uso



Indicazioni di sicurezza

Nonostante le strutture siano solide, componenti come cinture forate, bretelle, cinghie dentate e cuscinetti sono soggetti ad usura. Si consiglia pertanto di controllare accuratamente **PELVI.LOC**[®] ogni 3 mesi. Verificare in tale occasione anche che le cuciture e i collegamenti a vite siano ben saldi!

- Assicurarsi prima dell'utilizzo che il prodotto sia in condizioni idonee all'utilizzo e che sia posizionato correttamente – pericolo di incidente!
- I componenti danneggiati come cinghie forate/bretelle (f), cinghie dentate (b) o cuscinetti (a) non devono essere riparati o incollati e poi riutilizzati –pericolo di incidente!
- Non sedersi sui cuscinetti – pericolo per i punti di pressione, in particolare quelli dovuti ai cricchetti (c)!
- Non sollevare la sedia a rotelle dal **PELVI.LOC**[®] - pericolo di incidente!
- Fare attenzione a non mettere le mani tra la cintura forata e il tubo del telaio - o della seduta - pericolo di schiacciamento!

Restrizioni sull'uso / effetti collaterali indesiderati

- Non utilizzare il **PELVI.LOC**[®] se nell'area dei punti di contatto dei cuscinetti sono presenti ferite o altre lesioni non guarite – pericolo di lesioni!

- Non utilizzare il **PELVI.LOC**[®] in presenza di osteoporosi, osteogenesi imperfetta o forti disturbi alla circolazione sanguigna – pericolo di lesioni!
- Dopo la pulizia, verificare che il **PELVI.LOC**[®] funzioni correttamente!
- Riparare tempestivamente il **PELVI.LOC**[®] qualora fosse danneggiato –pericolo di incidente!



Attenzione:

- il **PELVI.LOC**[®] non è parte del sistema di supporto dello schienale della sedia a rotella e/o della persona durante il trasporto in un veicolo di trasporto per disabili.
- Nell'ambito della garanzia del prodotto, il produttore e il distributore respingono ogni responsabilità per danni o rischi relativi al prodotto, causati da bambini non supervisionati!

Utilizzo

1. Per utilizzare il **PELVI.LOC**[®] posizionare i cuscinetti (a)) sopra l'area del bacino/articolazione delle anche



Attenzione: verificare che sotto i cuscinetti non si trovi alcun oggetto! In questo modo si evitano punti di pressione dolorosi.

2. Dopodiché, condurre la cinghia dentata (b) attraverso il rispettivo cricchetto. Azionare contemporaneamente la fibbia a cricchetto (e) corrispondente.
 3. Successivamente, tendere la cinghia dentata (b) in modo che resti lo spazio per una mano aperta tra la coscia e il cuscinetto.
 4. Verificare che i giunti a scatto (c) si aggancino ai denti della cinghia dentata!
- Eseguire una prova di tensione!

Se durante l'uso del **PELVI.LOC**[®] si verifica un allentamento involontario del sistema di posizionamento, è possibile rimediare a ciò tendendo nuovamente le cinghie.

Per aprire il **PELVI.LOC[®]** azionare il giunto a scatto (c) ed estrarre la cinghia dentata.

- Fare attenzione a non far finire i cuscinetti negli interstizi della ruota motrice!

Pulizia e disinfezione

- Lavabile in lavatrice fino a 40 gradi.
- Disinfezione chemioterica possibile mediante l'aggiunta di ELTRA 40 al ciclo di lavaggio
- Non centrifugare
- Non idoneo per l'asciugatrice

Manutenzione

Controllare periodicamente la presenza di danni sul **PELVI.LOC**[®] e il suo corretto funzionamento.

Riparazioni

Sostituire tempestivamente il **PELVI.LOC**[®] se è difettoso.

Smaltimento

- Smaltire l'imballaggio del dispositivo nella raccolta differenziata.
- Smaltire le parti metalliche nei rifiuti metallici.
- Smaltire le parti in plastica nella raccolta della plastica.
- Smaltire i rifiuti ai sensi della normativa nazionale vigente.
- Chiedere alle amministrazioni cittadine e comunali informazioni in merito ai servizi di smaltimento locali.



Dati tecnici

	XS	S	M	L
Larghezza seduta (cm)	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46
Dimensione cuscinetti (cm)	17,5 x 9	20 x 11	23 x 13	25,5 x 14
Peso (g)	220	220	280	280
Punto di rottura target (per circa kg)	60	60	80	80

Cinghia dentata gr. XS - S	1,9 x 0,2 x 17,0 cm
Cinghia dentata gr. M- L	2,4 x 0,2 x 17,0 cm

Prodotto
privo di latex



Garanzia

Per il presente prodotto forniamo una garanzia in conformità alle disposizioni giuridiche. Questa copre difetti del materiale e della lavorazione. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura e le parti/i gruppi soggette/i a normale consumo, così come i danni causati da una sovrassollecitazione, da "uso non conforme", danneggiamento volontario o modifiche/riparazioni non conformi. In caso di richieste di risarcimento rivolgersi al proprio rivenditore specializzato da cui è stato acquistato il prodotto. Ai fini della garanzia, i lavori di riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere svolta dai rivenditori specializzati autorizzati, mediante l'uso di pezzi di ricambio originali



Produttore:

A2J GmbH
Am Fuchsberg 13
D-87452 Altusried
Telefono: +49 (08373) 987269
Fax: +49 (08373) 987276



Il presente prodotto è conforme ai requisiti base della direttiva CE 93/42/CEE per dispositivi medici

e-mail: info@a2j-intl.com
Internet: www.a2j-intl.com

Versione 01/03/2019

Il produttore si riserva il diritto di apporre
modifiche tecniche