




**PELVI.LOC®**

**Genuframe**

**PL-GF - XXS, - XS, - S, - M, - L, - XL**

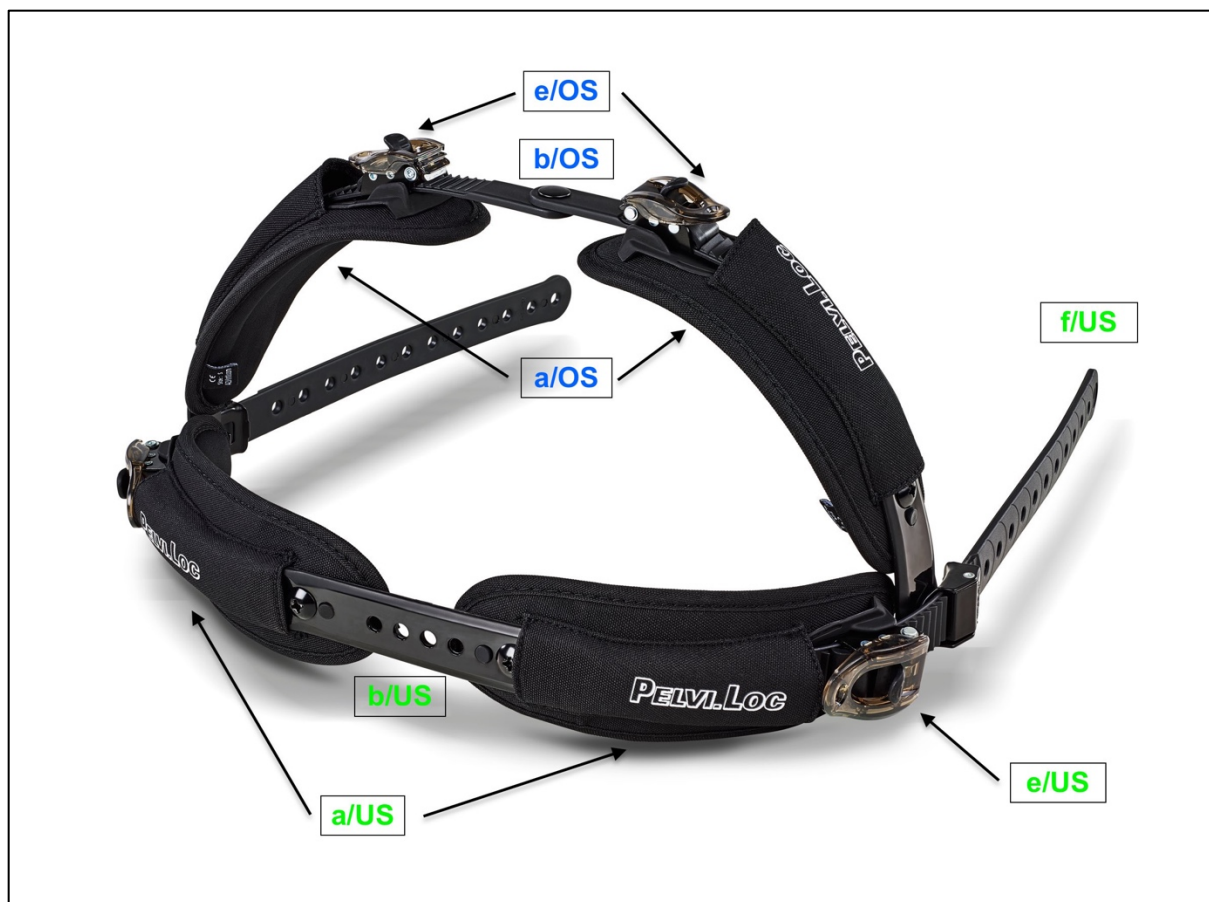

Per usare questo prodotto in sicurezza, prima del primo utilizzo leggere e osservare le presenti istruzioni per il montaggio e l'uso



### Ambito d'uso

Il **PELVI.LOC®** Genuframe - PL-GF serve alle persone con mobilità ridotta, specificatamente per il posizionamento del bacino e della coscia nella sedia a rotelle e nella sedia a rotelle attiva, e impedisce di scivolare in avanti.

### Gruppi di pazienti target:

- Bambini, giovani e adulti
- Sesso: femminile e maschile

### Controllo fornitura

Disimballare completamente il prodotto e verificare l'integrità dell'oggetto di fornitura e la presenza di danni di trasporto. Qualora si dovesse riscontrare inaspettatamente un difetto, procedere come segue:

1. presentare tempestivamente un reclamo allo spedizioniere
2. far protocollare il danno / difetto
3. informare tempestivamente noi o il proprio rivenditore specializzato

## Oggetto di fornitura

- 1) 1 x cintura per coscia **PELVI.LOC**<sup>®</sup> Genuframe- XXS, -XS, -S, -M, -L, -XL premontata
- 2) 1 x cintura per gamba **PELVI.LOC**<sup>®</sup> Genuframe- XXS, -XS, -S, -M, -L, -XL premontata
- 3) 1 x informazioni per il download elettronico delle istruzioni per il montaggio e l'uso

## Combinazione di dispositivi medici

Adatto per ausili predisposti per l'uso di una cintura di ritenuta del bacino

## Montaggio cintura per gamba



Il montaggio deve essere eseguito da una persona dotata delle necessarie competenze tecniche

Il montaggio della cintura per gamba **PELVI.LOC**<sup>®</sup> Genuframe è il medesimo del PL-UG

1. Posizionare i cuscinetti (**a/US**) rispettivamente nell'area delle gambe (al di sotto della tibia o della testa del femore). La cinghia forata/dentata (**f/US**) si trova all'esterno.
  - Il logo **PELVI.LOC**<sup>®</sup> sul cuscinetto della gamba sarà dunque visibile da davanti!
2. Impostare la distanza dei cuscinetti della gamba sopra le cinghie forate (**b/US**).
3. Fissare la cinghia forata/dentata (**f/US**) al tubo del telaio della sedia a rotelle
4. Tendere la cinghia forata/dentata (**f/US**) su entrambi i lati in modo uguale e in modo che resti lo spazio sufficiente per una mano aperta tra la coscia e il cuscinetto
5. Se necessario, è possibile tagliare a emiciclo le estremità della cinghia dentata. Eventualmente sbavare le estremità della cinghia dentata tagliata. –Pericolo di lesioni!
6. Verificare che la cinghia forata/dentata sia ben salda e bloccata su entrambi i lati!

## Montaggio cintura per coscia

Il montaggio della cintura per coscia **PELVI.LOC**<sup>®</sup> Genuframe è il medesimo del PL-2DB

7. Disporre ciascun cuscinetto (**a/OS**) nella rispettiva area della coscia. – La cinghia dentata (**b/OS**) deve essere disposta in alto.
  - Il logo **PELVI.LOC**<sup>®</sup> sul cuscinetto della coscia sarà dunque visibile da davanti!
8. Impostare la distanza dei cuscinetti con la cinghia dentata (**b/OS**), azionando le fibbie a cricchetto della cintura per coscia (**e/OS**).
  - La giuntura della cinghia dentata (**b/OS**) deve trovarsi al centro tra i due cuscinetti.
  - Estrarre la cinghia dentata massimo fino ad avere due denti liberi dietro alla fibbia a cricchetto (**e/OS**).



## Istruzioni per l'uso



### Indicazioni di sicurezza

Nonostante le strutture siano solide, componenti come cinture forate, bretelle, cinghie dentate e cuscinetti sono soggetti ad usura. Si consiglia pertanto di controllare accuratamente **PELVI.LOC**<sup>®</sup> ogni 3 mesi. Verificare in tale occasione anche che le cuciture e i collegamenti a vite siano ben saldi!

- Assicurarsi prima dell'utilizzo che il prodotto sia in condizioni idonee all'utilizzo e che sia posizionato correttamente – pericolo di incidente!
- I componenti danneggiati come cinghie forate/bretelle (f), cinghie dentate (b) o cuscinetti (a) non devono essere riparati o incollati e poi riutilizzati –pericolo di incidente!
- Non sedersi sui cuscinetti – pericolo per i punti di pressione, in particolare quelli dovuti alle fibbie a cricchetto (e)!
- Non sollevare la sedia a rotelle dal **PELVI.LOC**<sup>®</sup> - pericolo di incidente!
- Fare attenzione a non mettere le mani tra la cintura forata e il tubo del telaio - o della seduta - pericolo di schiacciamento!

### Restrizioni sull'uso / effetti collaterali indesiderati

- Non utilizzare il **PELVI.LOC**<sup>®</sup> se nell'area dei punti di contatto dei cuscinetti sono presenti ferite o altre lesioni non guarite – pericolo di lesioni!
- Non utilizzare il **PELVI.LOC**<sup>®</sup> in presenza di osteoporosi, osteogenesi imperfetta o forti disturbi alla circolazione sanguigna – pericolo di lesioni!
- Dopo la pulizia, verificare che il **PELVI.LOC**<sup>®</sup> funzioni correttamente!
- Riparare tempestivamente il **PELVI.LOC**<sup>®</sup> qualora fosse danneggiato –pericolo di incidente!



### Attenzione:

- il **PELVI.LOC**<sup>®</sup> non è parte del sistema di supporto dello schienale della sedia a rotella e/o della persona durante il trasporto in un veicolo di trasporto per disabili.
  - Nell'ambito della garanzia del prodotto, il produttore e il distributore respingono ogni responsabilità per danni o rischi relativi al prodotto, causati da bambini non supervisionati!
1. Per utilizzare il **PELVI.LOC**<sup>®</sup> posizionare i cuscinetti (a) sopra le gambe

### Utilizzo

1. Per utilizzare il **PELVI.LOC**<sup>®</sup> posizionare i cuscinetti (a) sopra le cosce e le gambe



**Attenzione:** verificare che sotto i cuscinetti non si trovi alcun oggetto! In questo modo si evitano punti di pressione dolorosi.

2. Dopodiché, condurre la cinghia dentata (**f/US**) attraverso il rispettivo cricchetto. Azionare contemporaneamente la fibbia a cricchetto (**e/US**) corrispondente.
  3. Successivamente, tendere la cinghia dentata (**f/US**) in modo che resti lo spazio per una mano aperta tra la coscia e il cuscinetto.
  4. Verificare che le fibbie a cricchetto (**e/US**) si aggancino ai denti della cinghia dentata!
- Eseguire una prova di tensione!

**Per aprire il PELVI.LOC®** azionare la fibbia a cricchetto (**e/US**) ed estrarre la cinghia dentata.

- Fare attenzione a non far finire i cuscinetti negli interstizi della ruota motrice!

### **Pulizia e disinfezione**

- Lavabile in lavatrice fino a 40 gradi.
- Disinfezione chemioterica possibile mediante l'aggiunta di ELTRA 40 al ciclo di lavaggio
- Non centrifugare
- Non idoneo per l'asciugatrice

### **Manutenzione**

Controllare periodicamente la presenza di danni sul **PELVI.LOC®** e il suo corretto funzionamento.

### **Riparazioni**

Sostituire tempestivamente il **PELVI.LOC®** se è difettoso.

### **Smaltimento**

- Smaltire l'imballaggio del dispositivo nella raccolta differenziata.
- Smaltire le parti metalliche nei rifiuti metallici.
- Smaltire le parti in plastica nella raccolta della plastica.
- Smaltire i rifiuti ai sensi della normativa nazionale vigente.
- Chiedere alle amministrazioni cittadine e comunali informazioni in merito ai servizi di smaltimento locali.



## Dati tecnici

	<b>XXS</b>	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>
<b>Larghezza ginocchio (cm)</b>	12 – 20	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	44 - 52
<b>Dimensione cuscinetti (cm)</b>	12 x 7	18 x 7	21 x 8	25,5 x 8	26,5 x 8,5	28,5 x 9
<b>Peso (g)</b>	200	220	220	280	280	300
<b>Punto di rottura target (per circa kg)</b>	60	60	60	80	80	80

<b>Cinghia dentata gr. XXS- XS - S</b>	1,9 x 0,2 x 17,0 cm
<b>Cinghia dentata gr. M- L – XL</b>	2,4 x 0,2 x 17,0 cm

Prodotto  
privo di  
latex



**Nota importante: Larghezza ginocchio, non larghezza seduta!**

## Garanzia

Per il presente prodotto forniamo una garanzia in conformità alle disposizioni giuridiche. Questa copre difetti del materiale e della lavorazione. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura e le parti/i gruppi soggette/i a normale consumo, così come i danni causati da una sovrasollecitazione, da “uso non conforme”, danneggiamento volontario o modifiche/riparazioni non conformi. In caso di richieste di risarcimento rivolgersi al proprio rivenditore specializzato da cui è stato acquistato il prodotto. Ai fini della garanzia, i lavori di riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere svolta dai rivenditori specializzati autorizzati, mediante l'uso di pezzi di ricambio originali



### Produttore:

A2J GmbH  
Am Fuchsberg 13  
D-87452 Altusried  
Telefono: +49 (08373) 987269  
Fax: +49 (08373) 987276  
e-mail: [info@a2j-intl.com](mailto:info@a2j-intl.com)  
Internet: [www.a2j-intl.com](http://www.a2j-intl.com)



Il presente prodotto è conforme ai requisiti base della direttiva CE 93/42/CEE per dispositivi medici