




## PELVI.LOC® PL-3DB - XS, -S, -M, -L, -XL



Pro bezpečné použití tohoto výrobku si přečtěte a před prvním použitím prosím dbejte návodu k montáži a použití.

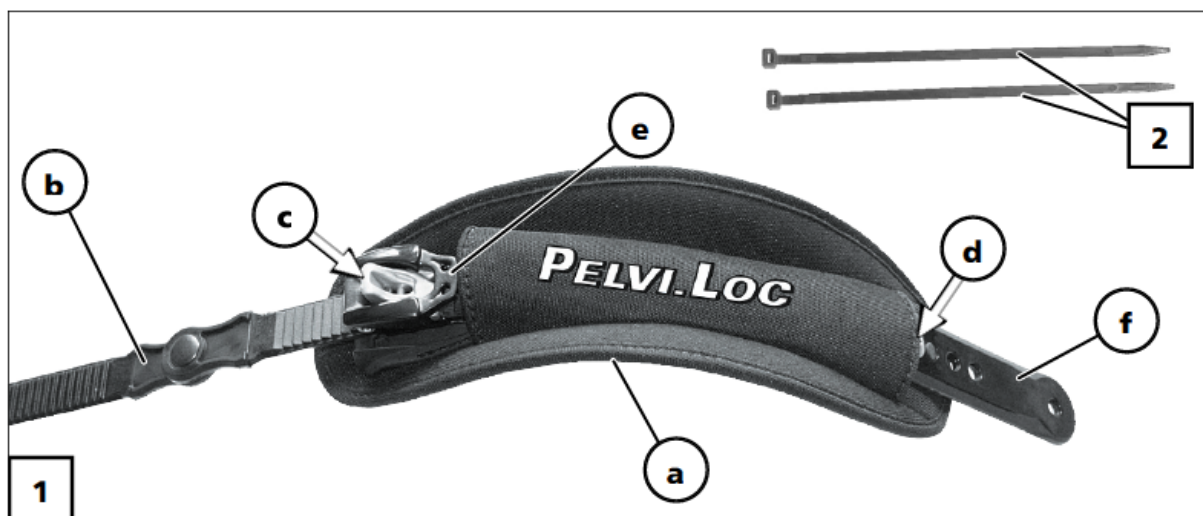

### Oblast použití

PELVI.LOC® PL-3DB slouží osobám s omezenou mobilitou, speciálně pro polohování pánve v invalidním vozíku a aktivním invalidním vozíku a brání sklouznutí dopředu.

### Určená skupina pacientů:

- děti, mládež a dospělé osoby
- pohlaví: ženské a mužské

### Kontrola při převzetí

Výrobek kompletně rozbalte a zásilku zkontrolujte z hlediska úplnosti a poškození při přepravě. Pokud byste zjistili, že zásilka oproti očekávání vykazuje vadu, tak:

1. ji okamžitě reklamujte u dopravce
2. nechte škodu / vadu zaznamenat do protokolu
3. okamžitě informujte nás nebo vašeho specializovaného prodejce

### Rozsah dodávky

- 1) 1 x PELVI.LOC® PL-3DB -XS, -S, -M, -L, -XL předmontováno
- 2) 2 x stahovací pásy 7,8 mm
- 3) 1 x informace k online stažení návodu k montáži a použití

### Kombinace zdravotnických výrobků

Vhodné pro pomůcky, které jsou určeny pro použití pánevního retrakčního pásu

## Montáž



Montáž by měla provést osoba s odbornými znalostmi.

1. Polstrování (a) přiložte vždy v oblasti pánve / kyčelního záhybu. – Ozubený pás (b) přitom leží nahoře.
  - Logo na polstrování přitom musí být čitelné zepředu!
2. Vzdálenost polstrování nastavte pomocí ozubeného pásu (b) stisknutím spony ráčny (e).
  - Kloub ozubeného pásu by se pak měl nacházet uprostřed mezi polstrováním.
  - Ozubený pás musí být max. natolik vytažený, aby byly ještě dva zuby za každou západkou (c) volné.
  - K nastavení může být povolen suchý zip (g) a polstrování roztaženo (dbejte jen u pásů se zakrytou sponou ráčny).
3. Následně umístíte děrované řemeny/popruhové pásy (f) na trubce rámu invalidního vozíku.
4. Ozubený pás (b) na obou stranách napněte stejně a natolik, aby bylo mezi stehnem a polstrováním ještě místo na jednu plochu ruky.
5. V případě potřeby mohou být konce ozubeného pásu polokruhově zkráceny. Z konce zkráceného ozubeného pásu odstraňte případné otřepy. – nebezpečí poranění!
6. Zkontrolujte pevné umístění a aretaci na obou stranách ozubeného pásu!



## Návod k použití



## Bezpečnostní pokyny

I přes stabilní konstrukci podléhají konstrukční díly, jako jsou děrované popruhy, pásy popruhů, ozubené pásy a polstrování určitému opotřebení. Proto doporučujeme každé tři měsíce **PELVI.LOC®** důkladně kontrolovat. Dbejte přitom také na dotažení nýtovaných a šroubovaných spojů!

- Před použitím se přesvědčte o stavu vhodném k použití a správné poloze výrobku - nebezpečí nehody!
- Poškozené konstrukční díly, jako jsou děrované řemeny / pásy popruhů (f), ozubený pás (b) nebo polstrování (a) neopravujte záplatami, resp. neslepujte a opět nepoužívejte - nebezpečí nehody!
- Na polstrování si nesedejte - nebezpečí otláčených míst především vlivem ráčen (e)!
- Invalidní vozík nezvedejte za **PELVI.LOC®** - nebezpečí nehody!
- Dbejte přitom na to, abyste nedávali ruce mezi děrovaný pás a trubku rámu nebo sedadla - nebezpečí přimáčknutí!

## Omezení použití / nežádoucí vedlejší účinky

- **PELVI.LOC®** nepoužívejte, když se v oblasti polstrování vyskytují otláčená místa, trhliny nebo jiná poškození - nebezpečí poranění!
- **PELVI.LOC®** nepoužívejte v případě osteoporózy, řídnutí kostí nebo silného prokrvování - nebezpečí poranění!
- Po vyčištění zajistěte správnou funkci **PELVI.LOC®**!
- Poškozený **PELVI.LOC®** by měl být okamžitě vyměněn - nebezpečí nehody!



### **Pozor:**

- **PELVI.LOC**<sup>®</sup> není součástí zadržného systému pro invalidní vozíky a/nebo cestující při přepravě ve vozidle pro přepravu postižených osob.
- Výrobce ani distributor nemohou být ve smyslu zodpovědnosti za výrobek zodpovědní za škody nebo rizika, která budou způsobena v souvislosti s výrobkem dětmi, které nejsou pod dohledem!

### **Použití**

1. K použití **PELVI.LOC**<sup>®</sup> je polstrování (a) pokládáno do oblasti pánve / kyčelního záhybu.



**Pozor:** Dbejte na to, aby se pod polstrováním nenacházely žádné předměty! Zabráňte tak bolestivým otlakům.

2. Poté ozubený pás (b) vedte skrz příslušnou ráčnu. Pro tento účel stiskněte příslušnou sponu ráčny (e).
  3. Následně ozubený pás (b) napněte natolik, aby bylo mezi stehnem a polstrováním ještě místo na jednu plochu ruky.
  4. Zajistěte, aby západky (e) zasahovaly do zubů ozubeného pásu!
- Provedte zkoušku tahu!

Pokud dojde během používání **PELVI.LOC**<sup>®</sup> k nechtěnému uvolnění polohovacího systému, pak to může být odstraněno opětovným napnutím.

**K otevření **PELVI.LOC**<sup>®</sup> PL-3DWP stiskněte západku (c) a vytáhněte ozubený pás.**

- Dbejte na to, aby se polstrování nedostalo mezi špice hnacího kola!

### **Čištění a dezinfekce**

- Vhodné k praní v pračce do 40 stupňů.
- Chemicko-tepelná dezinfekce je možná přidáním ELTRA 40 do prací operace.
- Neždímejte.
- Nevhodné do sušičky.

### **Údržba**

**PELVI.LOC**<sup>®</sup> pravidelně kontrolujte z hlediska poškození a funkčnosti.

### **Opravy**

Vadný **PELVI.LOC**<sup>®</sup> okamžitě vyměňte.

## Likvidace

- Obal přístroje může být předán k recyklaci druhotných surovin.
- Kovové díly mohou být předány k recyklaci použitých kovů.
- Plastové díly mohou být předány k recyklaci plastů.
- Likvidace musí probíhat dle příslušných národních zákonných ustanovení.
- Zeptejte se prosím správy vašeho města/obce na místní likvidační podniky.



## Technické údaje

	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>
<b>Délka sedadla (cm)</b>	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	40 - 48
<b>Velikost polstrování (cm)</b>	18 x 7	21 x 8	25,5 x 8	26,5 x 8,5	28,5 x 9
<b>Hmotnost (g)</b>	220	220	280	280	280
<b>Stanovené místo lomu (při cca kg)</b>	60	60	80	80	80

<b>Ozubený pás vel. XS - S</b>	1,9 x 0,2 x 17,0 cm
<b>Ozubený pás vel. M - XL</b>	2,4 x 0,2 x 17,0 cm

Výrobek neobsahuje  
latex



## Podmínky skladování a přepravy

	Teplotní rozsah pro dlouhodobé skladování od -10 °C do +40 °C. Krátkodobé teplotní výkyvy, např. během přepravy, od -20 °C do +60 °C materiál dobře snáší a nemají vliv na bezpečnost a výkonnost výrobku.
	Chraňte před vlhkostí během skladování a přepravy

## Záruční plnění

Za tento výrobek přebíráme zodpovědnost dle zákonných ustanovení. Ta se týká materiálových a výrobních vad. Jsou z ní vyloučeny opotřebitelné díly a díly/konstrukční skupiny, které podléhají stanovenému opotřebení, stejně jako škody, které vyplynou v důsledku nadměrného namáhání, použití v rozporu s určením, násilného poškození nebo nepřípustných změn/oprav. V případě záručního plnění se prosím obraťte na vašeho specializovaného prodejce, u kterého jste tento výrobek zakoupili. Z důvodů zodpovědnosti za výrobek smí být opravné, údržbové a servisní práce prováděny jen autorizovanými specializovanými prodejci s použitím originálních náhradních dílů.



**Výrobce:**

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Tel.: +49 (08373) 987269

Fax: +49 (08373) 987276

Email: [info@a2j-intl.com](mailto:info@a2j-intl.com)

Internet: [www.a2j-intl.com](http://www.a2j-intl.com)

Stav 20.05.2021



Tento výrobek splňuje Základní požadavky ES  
Směrnice o zdravotních prostředcích (EU)  
2017/745.

Technické změny vyhrazeny