




PELVI.LOC® PL-UG - XXS, - XS, - S, - M, - L, - XL



For sikker bruk av dette produktet, vennligst les og følg denne monterings- og bruksanvisningen før første bruk

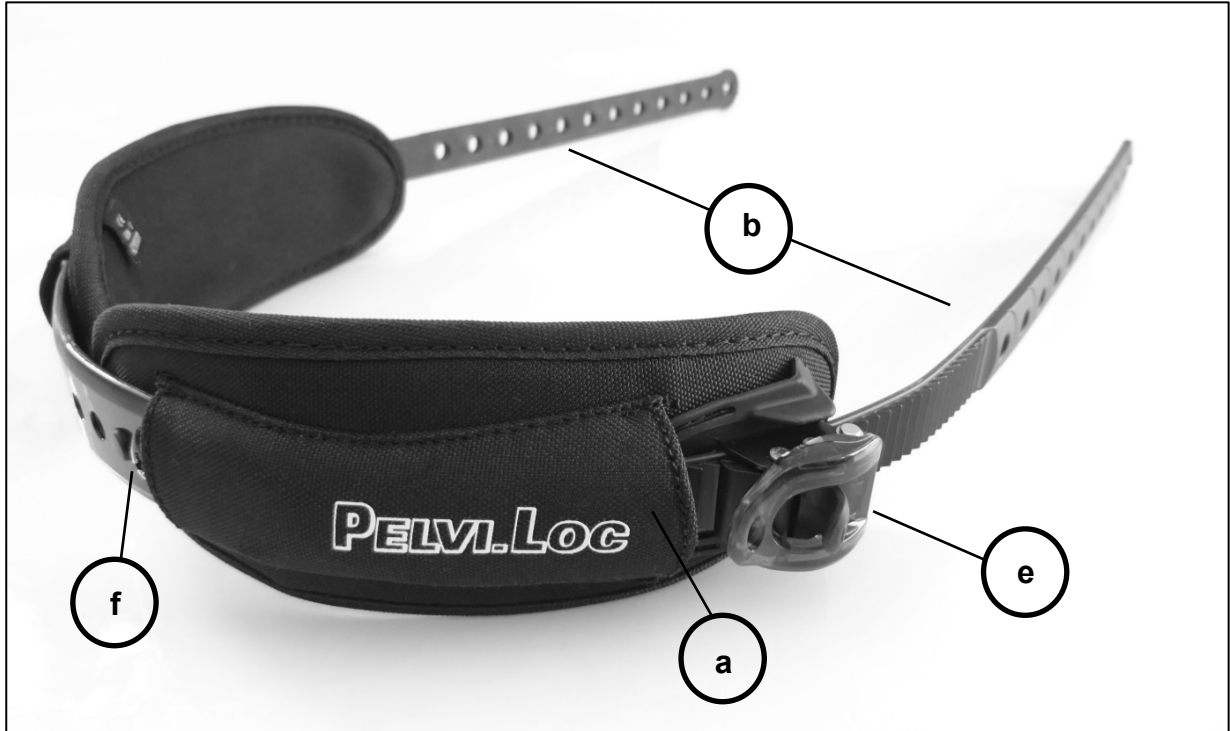

Bruksområde

PELVI.LOC® Nedre bein - belte - reversert - PL-UG er til bruk av personer med nedsatt bevegelse, spesielt for bekken- og lårplassering i rullestoler og aktivitetsrullestoler og forhindrer at brukeren glir fremover.

Beregnet pasientgruppe:

- Barn, ungdom og voksne
- Kjønn: kvinner og menn

Mottakskontroll

Pakk ut produktet helt og kontroller at forsendelsen er fullstendig og uten transportskader. Hvis du opplever at forsendelsen har en uventet feil, så:

1. Klag straks til transportøren
2. Få registrert skaden / feilen
3. Informer oss eller forhandleren din umiddelbart

Leveringsomfang

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-UG – XXS, -XS, -S, -M, -L, -XL forhåndsmontert
- 2) 1 x Informasjon for online nedlasting av monterings- og bruksanvisningen

Kombinasjon av medisinsk utstyr

Egnet som hjelpemiddel ved bruk av et bekkenbelte

Montering



Monteringen må utføres av en person med spesialkunnskap

1. Plasser alltid polstrene (a) på leggen (under begynnelsen på skinnebeinet eller leggbeinet). Dermed ligger tannbåndet (b) på utsiden.
 - **PELVI.LOC**[®]-logoen på polsteret kan dermed leses forfra.
2. Still inn avstanden mellom putene ved hjelp av det perforerte beltet (f).
3. Så festes tannbeltet (b) til rammerøret på rullestolen
4. Stram tannbeltet (b) likt på begge sider.
5. Ved behov kan endene av tannbeltet avrundes. Puss endene av det kuttete tannbeltet om nødvendig. – Fare for personskade.
6. Kontroller at festet sitter godt og er låst på begge sider av tannbeltet.



Bruksanvisning



Sikkerhetsanvisninger

På tross av den stabile konstruksjonen, er komponenter som låsebelter, tannbelter og polster utsatt for en viss mengde slitasje. Derfor anbefales det å gjennomføre en grundig inspeksjon av **PELVI.LOC**[®] hver 3. måned. Forsikre deg også om at nagle- og skrueforbindelsene er sikre!

- Du må kontrollere at produktet er i brukbar stand og har riktig passform før bruk - fare for ulykke!
- Ikke lapp eller lim ødelagte deler som låsestropper/sikkerhetsbelter (f) tannbelter (b) eller polstre (a), for så å bruke dem igjen – fare for ulykke.
- Ikke sitt på polsteret – Fare for trykkpunkter spesielt på grunn av sperrene (e).
- Ikke løft rullestolen over **PELVI.LOC**[®]. Fare for ulykke.
- Forsikre deg om at hendene ikke kommer mellom det tannbeltet og rammen eller seterøret - fare for klemskader!

Begrensninger i bruk / uønskede bivirkninger

- Ikke bruk **PELVI.LOC**[®] hvis det er bloduttredelser, sår eller andre skader som ikke er grodd i området til polsteret – fare for personskader.
- Ikke bruk **PELVI.LOC**[®] i tilfelle beintap, beinskjørhet eller alvorlige sirkulasjonsforstyrrelser - fare for personskade.
- Etter rengjøring må det påses at **PELVI.LOC**[®] virker som den skal.
- En skadet **PELVI.LOC**[®] bør skiftes ut umiddelbart – fare for ulykke.



Advarsel:

- **PELVI.LOC**® er ikke en del av sikkerhetssystemet for rullestolen og/eller brukeren ved transport av personer med nedsatt funksjonsevne i et kjøretøy.
- Når det gjelder produktansvar, kan verken produsenten eller distributøren holdes ansvarlig for skader eller risiko i tilknytning til barn uten tilsyn i forbindelse med produktet.

Bruk

1. For å bruke **PELVI.LOC**® legges polsteret (a) på leggen



Advarsel: Forsikre deg om at det ikke er gjenstander under polsteret! På den måten unngår du smertefulle trykksteder.

2. Før så tannbeltet (b) gjennom den respektive sperren. For å gjøre dette, bruk den tilhørende skrallespennen (e).
 3. Så strammes tannbåndet (b) så mye at det fremdeles er nok plass til å legge en håndflate mellom leggen og polsteret.
 4. Forsikre deg om at spennene (e) griper inn i tennene på tannbeltet.
- Gjennomfør en strekkprøve.

For å åpne **PELVI.LOC®** trykk på spennen (e) og trekk ut tannbeltet.

- Pass på at polstrene ikke kommer inn mellom eikene på drivhjulet.

Rengjøring og desinfisering

- Kan vaskes i maskin ved 40 grader.
- Kjemotermisk desinfisering mulig ved å tilsette ELTRA 40 til vaskesyklusen
- Ingen sentrifugering
- Egner seg ikke i tørketrommelen

Vedlikehold

PELVI.LOC® må regelmessig sjekkes for skader og funksjonalitet.

Reparasjon

Defekt **PELVI.LOC**® må skiftes ut omgående.

Avfallsbehandling

- Emballasjen til enheten kan gjenvinnes.
- Metalldelene kan kastes i metallavfall, og er gjenvinnbare.
- Plastmaterialene er gjenvinnbare.
- Avfallshåndteringen må skje i henhold til respektive forskrifter på stedet.
- Spør lokalt / kommunen om lokale avfallsselskaper.



Tekniske data

| | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|------------|-----------|----------|----------|------------|-----------|
| Knebredde (cm) | 12 – 20 | 16 – 24 | 20 – 32 | 30 – 40 | 36 – 46 | 44 – 52 |
| Polstringsstørrelse (cm) | 11,5 x 7,5 | 18 x 7 | 21 x 8 | 25,5 x 8 | 26,5 x 8,5 | 28,5 x 9 |
| Vekt (g) | 200 | 220 | 220 | 280 | 280 | 280 |
| Forutbestemt bruddpunkt (ca. kg) | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |

| | |
|--|---------------------|
| Størrelse tannbånd XXS - XS - S | 1,9 x 0,2 x 19,5 cm |
| Størrelse tannbånd M - L - XL | 2,4 x 0,2 x 22,5 cm |

Produktet er latexfritt



Viktig merknad: Knebredde, ikke Setebredde!

Garanti

Vi aksepterer garantien for dette produktet i samsvar med gjeldende lovbestemmelser. Den gjelder materiale og produksjonsfeil. Utelukket fra dette er slitasjedeler og deler / delegrupper som er utsatt for normal slitasje, samt skader som skyldes overdreven bruk, "feil bruk", voldelig skade eller uautorisert modifisering / reparasjon. Ved garantikrav, kontakt spesialistforhandleren du kjøpte dette produktet fra. Av hensyn til produktansvar, må reparasjon, vedlikehold og reparasjonsarbeid kun utføres av autoriserte spesialforhandlere som bruker originale reservedeler



Produsent:

A2J GmbH
Am Fuchsberg 13
D-87452 Altusried
Tlf.: +49 (08373) 987269
Faks: +49 (08373) 987276
e-post: info@a2j-intl.com
Internett: www.a2j-intl.com



Dette produktet er i samsvar med de grunnleggende bestemmelsene i EUs forskrift 93/42/EU om medisinske produkter.

Versjon 01.05.2019

Tekniske endringer forbeholdes