




PELVI.LOC® Genuframe PL-GF -XXS, -XS, -S, -M, -L, -XL



Pour assurer une utilisation sûre de ce produit, veuillez lire et respecter les présentes instructions de montage et de service avant la première utilisation

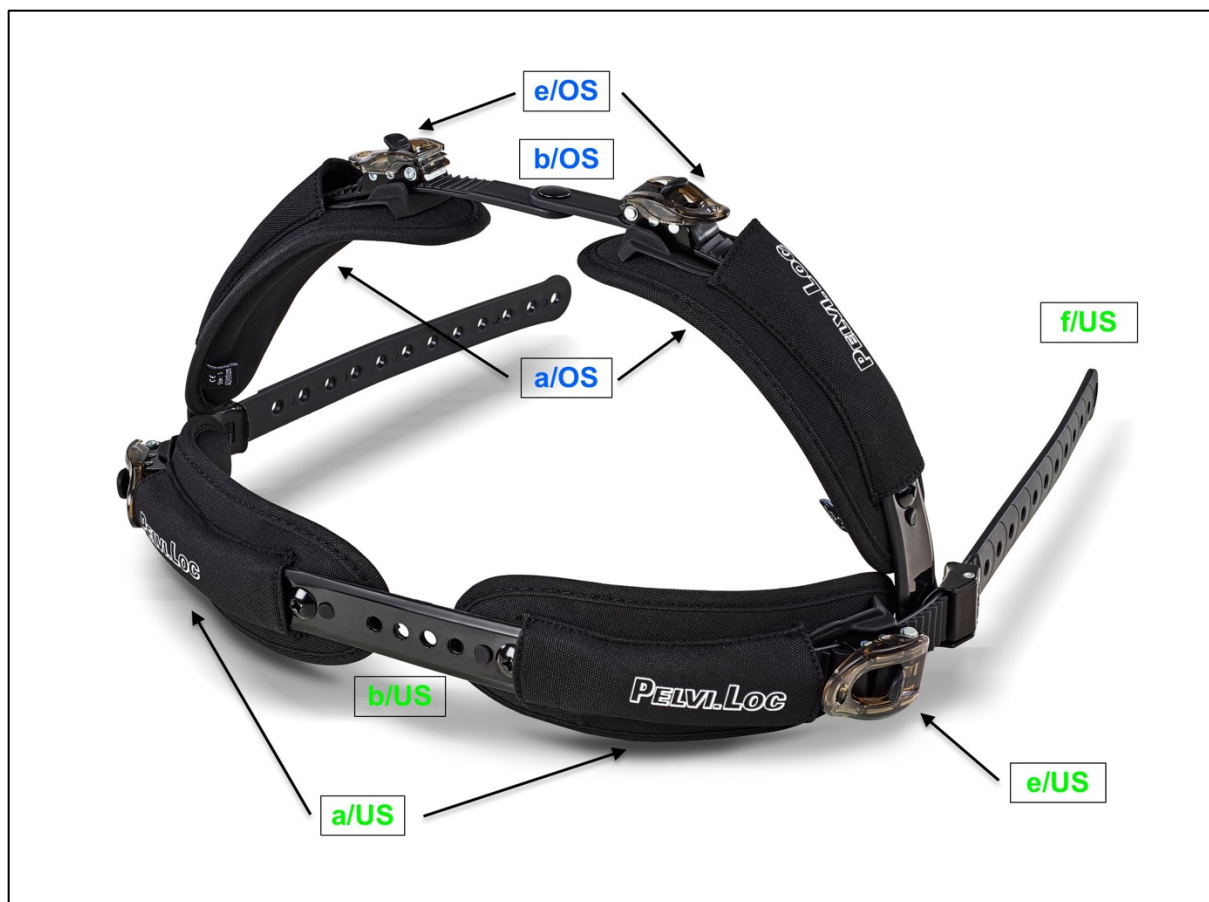

Domaine d'application

La **PELVI.LOC®** Genuframe PL-GF sert notamment à positionner le bassin et les cuisses des personnes à mobilité réduite dans le fauteuil roulant et le fauteuil roulant actif et empêche un glissement vers l'avant.

Groupe de patients cible :

- Enfants, jeunes et adultes
- Sexe : féminin et masculin

Contrôle lors de la réception

Déballer le produit complètement et contrôlez l'intégralité et l'absence de dommages dus au transport.

Si, contrairement aux attentes, vous constatez que le colis présente un défaut :

1. Faites une réclamation immédiate auprès du transporteur
2. Faites consigner le dommage / défaut
3. Informez-nous ou votre revendeur immédiatement

Contenu de l'emballage

- 1) 1 sangle de cuisse **PELVI.LOC**[®] Genuframe -XXS, -XS, -S, -M, -L, -XL préassemblée
- 2) 1 sangle de jambe **PELVI.LOC**[®] Genuframe -XXS, -XS, -S, -M, -L, -XL préassemblée
- 3) 1 feuille d'informations sur le téléchargement en ligne des instructions de montage et de service

Combinaison de dispositifs médicaux

Convient pour les moyens auxiliaires prévus pour l'emploi d'une sangle de rétraction du bassin

Montage de la sangle de jambe



Le montage doit être effectué par une personne possédant des connaissances techniques

Le montage de la sangle de jambe **PELVI.LOC**[®] Genuframe est comparable à celui du PL-UG.

1. Poser les coussins (**a/US**) dans la région de chaque jambe (au-dessous du tibia ou de la tête du péroné). La courroie perforée / courroie dentée (**f/US**) doit alors se trouver dehors.
 - Le logo **PELVI.LOC**[®] figurant sur le coussin de jambe peut ensuite être lu de l'avant !
2. Régler l'écart entre les coussins de jambe avec la courroie perforée (**b/US**).
3. Fixer la courroie perforée / courroie dentée (**f/US**) au tube du cadre du fauteuil roulant.
4. Tendre la courroie perforée / courroie dentée (**f/US**) sur les deux côtés de la façon égale et autant qu'il reste encore de la place pour une main à plat entre les cuisses et les coussins.
5. En cas de besoin, les extrémités de la courroie dentée peuvent être découpées en demi-cercle. Le cas échéant, ébarber les extrémités de la courroie dentée découpée : risque de blessure !
6. Vérifier que les deux côtés de la courroie perforée / courroie dentée (**f/US**) sont bien fixés et bloqués !

Montage de la sangle de cuisse

Le montage de la sangle de cuisse **PELVI.LOC**[®] Genuframe est comparable à celui du PL-2DB.

1. Poser les coussins (**a/OS**) dans la région des cuisses. – La courroie dentée (**b/OS**) doit alors se trouver dessus.
 - Le logo **PELVI.LOC**[®] figurant sur le coussin de cuisse peut ensuite être lu du dessus !
2. Régler l'écart entre les coussins avec la courroie dentée (**b/OS**) en actionnant les boucles à cliquet de la sangle de cuisse (**e/OS**).
 - L'articulation de la courroie dentée (**b/OS**) devrait alors se trouver au milieu des coussins.
 - Retirer la courroie dentée au maximum de sorte que deux dents seulement restent libres derrière chaque boucle à cliquet (**e/OS**).



Instructions de service



Consignes de sécurité

En dépit de leurs structures robustes, certains composants, tels que les courroies perforées, les sangles, les courroies dentées et les coussins, sont soumis à une certaine usure. Par conséquent, il est recommandé de contrôler minutieusement la **PELVI.LOC**[®] tous les 3 mois. Ce faisant, faire attention au bon serrage des raccords rivetés et vissés !

- Avant l'utilisation, assurez-vous de l'état opérationnel et de la bonne fixation du produit : risque d'accident !
- Ne pas rafistoler ni coller les composants endommagés comme les courroies perforées / la sangle (f), la courroie dentée (b) ou le coussin (a) pour les réutiliser : risque d'accident !
- Ne vous asseyez pas sur les coussins : risque de meurtrissures notamment par les boucles à cliquet (e) !
- Ne soulevez pas le fauteuil roulant avec la **PELVI.LOC**[®] : risque d'accident !
- Ne mettez pas les mains entre la courroie perforée et le tube de cadre ou le tube de selle : risque d'écrasement !

Restrictions d'utilisation / effets secondaires indésirables

- N'utilisez pas la **PELVI.LOC**[®] en cas de meurtrissures, plaies ou autres blessures non guéries dans la zone des coussins : risque de blessure !
- N'utilisez pas la **PELVI.LOC**[®] en cas d'ostéoporose, ostéogénèse imparfaite ou troubles vasculaires graves : risque de blessure !
- Après le nettoyage, assurer le fonctionnement correct de la **PELVI.LOC**[®] !
- Une **PELVI.LOC**[®] endommagée devrait être immédiatement remplacée : risque d'accident !



Attention :

- La **PELVI.LOC**[®] ne fait pas partie du système de retenue du fauteuil roulant et / ou ses occupants lors du transport dans un véhicule de transport de handicapés.
 - Ni fabricant, ni distributeur ne peuvent être tenus dans le sens de la responsabilité du fait du produit pour les dommages ou risques en rapport avec le produit provoqués par des enfants non surveillés !
1. Pour l'utilisation de la **PELVI.LOC**[®], les coussins (a) sont posés sur les jambes.

Utilisation

1. Pour l'utilisation de la **PELVI.LOC**[®], les coussins (a) sont posés sur les cuisses et les jambes.



Attention : Veillez à ce qu'aucun objet ne se trouve au-dessous du coussin ! Vous évitez ainsi des meurtrissures douloureuses.

2. Puis, passer la courroie dentée (**f/US**) à travers le cliquet respectif. À cette fin, actionner la boucle à cliquet (**e/US**) correspondante.
 3. Ensuite, tendre la courroie dentée (**f/US**) autant qu'il reste encore de la place pour une main à plat entre les cuisses et les coussins.
 4. Assurez-vous que les boucles à cliquet (**e/US**) s'insèrent dans les dents de la courroie dentée !
- Effectuer un essai de traction !

Pour ouvrir la **PELVI.LOC[®]**, actionner la boucle à cliquet (**e/US**) et retirer la courroie dentée.

- Veiller à ce que les coussins ne soient pris entre les rayons de la roue d'entraînement !

Nettoyage et désinfection

- Peut être lavé dans la machine à laver jusqu'à 40 degrés Celsius.
- Une désinfection thermochimique est possible par l'ajout d'ELTRA 40 au cycle de lavage.
- Ne pas essorer.
- Ne pas passer au sèche-linge.

Entretien

Vérifier régulièrement l'absence d'endommagements et le bon fonctionnement de la **PELVI.LOC®**.

Réparations

Remplacer immédiatement la **PELVI.LOC®** défectueuse.

Élimination

- L'emballage du produit est recyclable.
- Les pièces métalliques peuvent être déposées auprès des centres de recyclage de métaux.
- Les pièces en plastique peuvent être déposées auprès des centres de recyclage des matières plastiques.
- L'élimination doit avoir lieu conformément aux dispositions légales nationales applicables.
- Veuillez vous informer des entreprises de collecte locales auprès de la municipalité.



Données techniques

	XXS	XS	S	M	L	XL
Largeur du genou (cm)	12 - 20	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	44 - 52
Dimensions du coussin (cm)	12 x 7	18 x 7	21 x 8	25,5 x 8	26,5 x 8,5	28,5 x 9
Poids (g)	200	220	220	280	280	300
Point de rupture (à env. kg)	60	60	60	80	80	80

Courroie dentée tailles XXS - XS - S	1,9 x 0,2 x 17,0 cm
Courroie dentée tailles M - L - XL	2,4 x 0,2 x 17,0 cm

Le produit est exempt de latex



Remarque importante : largeur du genou, pas largeur de l'assise !

Garantie

Nous octroyons la garantie pour ce produit conformément aux dispositions légales. Elle s'étend sur les défauts de matériau et de fabrication. Ne sont pas couverts par la garantie les pièces d'usure et les pièces / assemblages soumis à une usure normale, ainsi que les dommages résultant d'une sollicitation excessive, de « l'utilisation non conforme », d'une détérioration par la force ou d'une modification / mise en service non autorisée. En cas de garantie, veuillez contacter votre revendeur

chez lequel vous avez acheté ce produit. Pour des raisons de la responsabilité du fait du produit, les travaux de réparation, d'entretien et de remise en état doivent être réalisés uniquement par des revendeurs agréés utilisant uniquement des pièces d'origine.



Fabricant :

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Téléphone : +49 (08373) 987269

Fax : +49 (08373) 987276

E-mail : info@a2j-intl.com

Internet : www.a2j-intl.com



Ce produit répond aux exigences essentielles de la directive CE 93/42/CEE pour les dispositifs médicaux

Version du 01/05/2019

Sous réserve de modifications techniques