



PELVI.LOC® PL-3DASR - XS - S - M - L



Fonctionnement sous la couverture, voir la figure ci-dessous



Pour assurer une utilisation sûre de ce produit, veuillez lire et respecter les présentes instructions de montage et de service avant la première utilisation



Domaine d'application

La **PELVI.LOC**® PL-3DASR sert notamment à positionner le bassin des personnes à mobilité réduite dans le fauteuil roulant et le fauteuil roulant actif et empêche un glissement vers l'avant.

Groupe de patients cible :

- Enfants, jeunes et adultes
- Sexe : féminin et masculin

Contrôle lors de la réception

Déballer le produit complètement et contrôler l'intégralité et l'absence de dommages dus au transport.

Si, contrairement aux attentes, vous constatez que le colis présente un défaut :

1. Faites une réclamation immédiate auprès du transporteur
2. Faites consigner le dommage / défaut
3. Informez-nous ou votre revendeur immédiatement

Contenu de l'emballage

- 1) 1 **PELVI.LOC**[®] PL-3DASR -XS, -S, -M, -L désassemblée
- 2) 1 feuille d'informations sur le téléchargement en ligne des instructions de montage et de service

Montage



Le montage doit être effectué par une personne possédant des connaissances techniques

1. Poser les coussins (a) dans la région des cuisses. – Fixer la courroie dentée (b) au fauteuil roulant.
 - Le logo figurant sur le coussin peut ensuite être lu de l'avant !
2. Régler l'écart entre les coussins avec la courroie perforée (d). Le sangle de rétraction du bassin est tendue par l'actionnement des boucles à cliquet (e).
 - L'articulation de la courroie perforée devrait alors se trouver au milieu des coussins.
 - Retirer la courroie dentée au max. de sorte que deux dents seulement restent libres derrière chaque boucle à cliquet (c).
 - Pour le réglage, il est possible de détacher la bande auto-agrippante et de relever le coussin (prendre en compte uniquement en cas de sangles avec des boucles à cliquets recouvertes).
3. Ensuite, fixer la courroie dentée (b) au tube du cadre du fauteuil roulant.
4. Tendre la courroie dentée (b) sur les deux côtés de la façon égale et autant qu'il reste encore de la place pour une main à plat entre les cuisses et les coussins.
5. En cas de besoin, les extrémités de la courroie dentée peuvent être découpées en demi-cercle. Le cas échéant, ébarber les extrémités de la courroie dentée découpée : risque de blessure !
6. Vérifier que les deux côtés de la courroie dentée sont bien fixés et bloqués !



Instructions de service



Consignes de sécurité

En dépit de leurs structures robustes, certains composants, tels que les courroies perforées, les sangles, les courroies dentées et les coussins, sont soumis à une certaine usure. Par conséquent, il est recommandé de contrôler minutieusement la **PELVI.LOC**[®] tous les 3 mois. Ce faisant, faire attention au bon serrage des raccords rivetés et vissés !

- Avant l'utilisation, assurez-vous de l'état opérationnel et de la bonne fixation du produit : risque d'accident !

- Ne pas rafistoler ni coller les composants endommagés comme les courroies perforées / la sangle (d), la courroie dentée (b) ou le coussin (a) pour les réutiliser : risque d'accident !
- Ne vous asseyez pas sur les coussins : risque de meurtrissures notamment par les cliquets (e) !
- Ne soulevez pas le fauteuil roulant avec la **PELVI.LOC**[®] : risque d'accident !
- Ne mettez pas les mains entre la courroie perforée et le tube de cadre ou le tube de selle : risque d'écrasement !

Restrictions d'utilisation / effets secondaires indésirables

- N'utilisez pas la **PELVI.LOC**[®] en cas de meurtrissures, plaies ou autres blessures non guéries dans la zone des coussins : risque de blessure !
- N'utilisez pas la **PELVI.LOC**[®] en cas d'ostéoporose, ostéogénèse imparfaite ou troubles vasculaires graves : risque de blessure !
- Après le nettoyage, assurer le fonctionnement correct de la **PELVI.LOC**[®] !
- Une **PELVI.LOC**[®] endommagée devrait être immédiatement remplacée : risque d'accident !

Utilisation

1. Pour l'utilisation de la **PELVI.LOC**[®], les coussins (a) sont posés sur les cuisses.



Attention : Veillez à ce qu'aucun objet ne se trouve au-dessous du coussin ! Vous évitez ainsi des meurtrissures douloureuses.

2. **Important :** Ne pas mettre sur le bassin ou la colonne vertébrale !
 3. Puis, passer la courroie dentée (b) à travers le cliquet respectif. À cette fin, actionner la boucle à cliquet (e) correspondante.
 4. Ensuite, tendre la courroie dentée (b) autant qu'il reste encore de la place pour une main à plat entre les cuisses et les coussins.
 5. Assurez-vous que les cliquets de la boucle à cliquet (e) s'insèrent dans les dents de la courroie dentée !
- Effectuer un essai de traction !

Si, au cours de l'utilisation de la **PELVI.LOC**[®], le système de positionnement se relâche de façon inopinée, il convient de retendre.

Pour ouvrir la **PELVI.LOC[®]**, actionner le cliquet de la boucle à cliquet (e) et retirer la courroie dentée.

- Veiller à ce que les coussins ne soient pris entre les rayons de la roue d'entraînement !

Nettoyage et désinfection

- Peut être lavé dans la machine à laver jusqu'à 40 degrés Celsius.
- Une désinfection thermo-chimique est possible par l'ajout d'ELTRA 40 au cycle de lavage.
- Ne pas essorer.
- Ne pas passer au sèche-linge.

Entretien

Vérifier régulièrement l'absence d'endommagements et le bon fonctionnement de la **PELVI.LOC®**.

Réparations



Remplacer immédiatement la **PELVI.LOC®** défectueuse.

Élimination

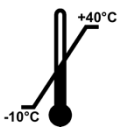

- L'emballage du produit est recyclable.
- Les pièces métalliques peuvent être déposées auprès des centres de recyclage des métaux.
- Les pièces en plastique peuvent être déposées auprès des centres de recyclage des matières plastiques.
- L'élimination doit avoir lieu conformément aux dispositions légales nationales applicables.
- Veuillez vous informer des entreprises de collecte locales auprès de la municipalité.

Données techniques

	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL
Largeur de l'assise (cm)			16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	
Dimensions du coussin (cm)			17,5 x 9	20 x 11	23 x 13	25,5 x 14	
Poids (g)			220	220	280	280	
Point de rupture (à env. kg)			60	60	80	80	

Courroie dentée tailles XXXS - XXS		Le produit est exempt de latex  
Courroie dentée tailles XS - S	1,9 x 0,2 x 17,0 cm	
Courroie dentée tailles M - L	2,4 x 0,2 x 17,0 cm	
Boucle à cliquet taille XXXS		
Boucle à cliquet taille XXS		
Boucle à cliquet tailles XS - S	B-19-ERGO-BL	
Boucle à cliquet tailles M - L	B-24-ERGO-BL	

Conditions de stockage et de transport

	<p>Plage de température pour un stockage à long terme de -10°C à +40°C.</p> <p>Les pics de température à court terme, par exemple dans le cadre du transport, de -20°C à +60°C, sont bien tolérés par le matériau et n'ont aucune incidence sur la sécurité et les performances du produit.</p>
	<p>Protéger de l'humidité lors du stockage et du transport</p>

Garantie

Nous octroyons la garantie pour ce produit conformément aux dispositions légales. Elle s'étend sur les défauts de matériau et de fabrication. Ne sont pas couverts par la garantie les pièces d'usure et les pièces / assemblages soumis à une usure normale, ainsi que les dommages résultant d'une sollicitation excessive, de « l'utilisation non conforme », d'une détérioration par la force ou d'une modification / mise en service non autorisée. En cas de garantie, veuillez contacter votre revendeur chez lequel vous avez acheté ce produit. Pour des raisons de la responsabilité du fait du produit, les travaux de réparation, d'entretien et de remise en état doivent être réalisés uniquement par des revendeurs agréés utilisant uniquement des pièces d'origine.



Fabricant :

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Téléphone : +49 (08373) 987269

Fax : +49 (08373) 987276

E-mail : info@a2j-intl.com

Internet : www.a2j-intl.com



Ce produit est conforme aux exigences essentielles du règlement européen 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux (Medical Device Regulation, MDR).

Version du 01.01.2025

Sous réserve de modifications techniques