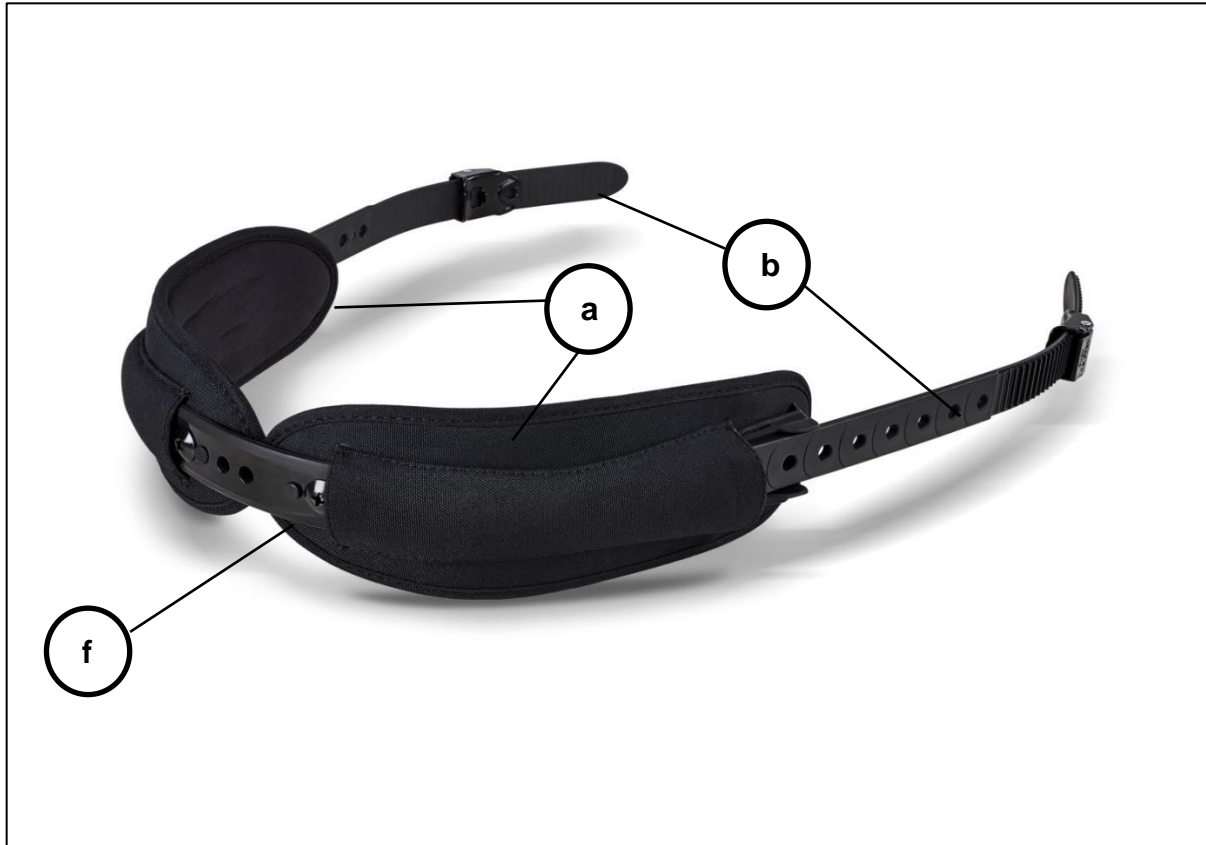




PELVI.LOC® PL-UGR - XXS, - XS, - S, - M, - L, - XL



Für die sichere Anwendung dieses Produktes lesen und beachten Sie bitte vor dem Erstgebrauch diese Montage- und Gebrauchsanweisung



Anwendungsbereich

Der **PELVI.LOC®** Unterschenkel - Gurt - Reversed - PL-UGR dient Personen mit eingeschränkter Mobilität, speziell zur Becken - Oberschenkel Positionierung im Rollstuhl und Aktiv-Rollstuhl und verhindert ein nach vorne rutschen.

Vorgesehene Patientengruppe:

- Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- Geschlecht: weiblich und männlich

Empfangskontrolle

Packen Sie das Produkt komplett aus und prüfen Sie die Sendung auf Vollständigkeit und Transportschäden. Sollten Sie feststellen, dass die Sendung wider Erwarten einen Fehler aufweist, so:

1. Reklamieren Sie unverzüglich beim Frachtführer
2. Lassen Sie den Schaden / Fehler protokollieren
3. Informieren Sie uns oder Ihren Fachhändler unverzüglich

Lieferumfang

- 1) 1 x **PELVI.LOC**[®] PL-UGR -XXS, -XS, -S, -M, -L, -XL vormontiert
- 2) 1 x Informationen zum online Download der Montage- und Gebrauchsanweisung

Kombination von Medizinprodukten

Geeignet für Hilfsmittel die für den Einsatz eines Beckenretraktionsgurtes vorgesehen sind

Montage



Die Montage sollte durch eine Person mit fachlichen Kenntnissen erfolgen

1. Die Polster (a) jeweils im Unterschenkelbereich (unterhalb des Tibia oder Fibula Köpfchens) anlegen. Das Zahnband (b) liegt dabei außen.
 - Das **PELVI.LOC**[®] Logo auf dem Polster ist danach von vorn lesbar!
2. Den Abstand der Polster über den Lochriemen (f) einstellen.
3. Das Zahnband (b) am Rahmenrohr des Rollstuhls befestigen
4. Das Zahnband (b) auf beiden Seiten gleich spannen
5. Bei Bedarf können die Enden des Zahnbands halbrund abgelängt werden. Die Enden des abgelängten Zahnbands ggf. entgraten. –Verletzungsgefahr!
6. Den festen Sitz sowie die Arretierung auf beiden Seiten des Zahnbands prüfen!



Gebrauchsanweisung



Sicherheitshinweise

Trotz der stabilen Bauweisen unterliegen Bauteile wie Lochgurte, Gurtbänder, Zahnbänder und Polster einem gewissen Verschleiß. Daher wird empfohlen, den **PELVI.LOC**[®] alle 3 Monate gründlich zu kontrollieren. Hierbei ist auch auf den festen Sitz von Nieten- und Schraubverbindungen zu achten!

- Überzeugen Sie sich vor der Benutzung von dem gebrauchstauglichen Zustand sowie dem korrekten Sitz des Produktes – Unfallgefahr!
- Beschädigte Bauteile wie Lochriemen/Gurtband (f), Zahnband (b) oder Polster (a) nicht flicken bzw. kleben und wieder einsetzen – Unfallgefahr!
- Setzen Sie sich nicht auf die Polster – Gefahr von Druckstellen!
- Heben Sie den Rollstuhl nicht über den **PELVI.LOC**[®] an - Unfallgefahr!
- Achten Sie darauf, dass die Hände nicht zwischen Lochgurt und Rahmen- oder Sitzrohr geraten - Quetschgefahr!

Anwendungsbeschränkungen / unerwünschte Nebenwirkungen

- Verwenden Sie den **PELVI.LOC**[®] nicht, wenn sich in dem Bereich der Polster Druckstellen, Wunden oder andere nicht verheilte Verletzungen befinden – Verletzungsgefahr!
- Verwenden Sie den **PELVI.LOC**[®] nicht bei Knochenschwund, Glasknochen oder starken Durchblutungsstörungen – Verletzungsgefahr!
- Nach dem Reinigen die korrekte Funktion des **PELVI.LOC**[®] sicherstellen!
- Ein beschädigter **PELVI.LOC**[®] sollte unverzüglich erneuert werden – Unfallgefahr!



Achtung:

- Der **PELVI.LOC**[®] ist nicht Teil des Rückhaltesystems für den Rollstuhl und/oder Insassen beim Transport in einem Behindertentransportfahrzeug.
- Weder Produzent noch Vertrieb können, im Sinne der Produkthaftung, für Schäden oder Risiken haftbar gemacht werden, die durch unbeaufsichtigte Kinder, im Zusammenhang mit dem Produkt, verursacht werden!

Anwendung

1. Zum Gebrauch des **PELVI.LOC**[®] werden die Polster (a) an die Unterschenkel angelegt



Achtung: Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände unter dem Polster befinden! So vermeiden Sie schmerzhaft Druckstellen.

2. Dann das Zahnband (b) durch die jeweilige Ratsche führen. Dazu die entsprechende Ratschenschnalle betätigen.
 3. Anschließend das Zahnband (b) so weit spannen, dass noch Platz für eine flache Hand zwischen Unterschenkel und Polster ist.
 4. Stellen Sie sicher, dass die Ratschenschnallen in die Zähne des Zahnbands greifen!
- Zugprobe durchführen!

Zum Öffnen des **PELVI.LOC[®]** die Ratschenschnalle betätigen und das Zahnband herausziehen.

- Darauf achten, dass die Polster nicht zwischen die Speichen des Antriebsrades geraten!

Reinigung und Desinfektion

- Geeignet für die Waschmaschine bis 40 Grad.
- Chemothermische Desinfektion möglich durch Zugabe von ELTRA 40 zum Waschgang
- Nicht schleudern
- Nicht geeignet für den Trockner

Wartung

Der **PELVI.LOC**[®] ist regelmäßig auf Beschädigung und Funktion zu überprüfen.

Reparaturen



Defekten **PELVI.LOC**[®] unverzüglich austauschen.

Entsorgung

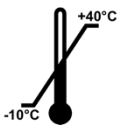

- Die Geräteverpackung kann der Wertstoffwiederverwendung zugeführt werden.
- Die Metallteile können der Altmetallverwertung zugeführt werden.
- Kunststoffteile können der Kunststoffverwertung zugeführt werden.
- Die Entsorgung muss gemäß den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.
- Fragen Sie bitte bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung nach örtlichen Entsorgungsunternehmen.

Technische Daten

	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL
Sitzbreite (cm)		12 - 20	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	44 - 52
Polstergröße (cm)		14 x 6	18 x 7	21 x 8	25,5 x 8	26,5 x 8,5	28,5 x 9
Gewicht (g)		220	220	220	280	280	280
Sollbruchstelle (bei ca. kg)		40	60	60	80	80	80

Zahnband Gr. XXXS - XXS		Produkt ist  latexfrei 
Zahnband Gr. XS - S	1,9 x 0,2 x 40 cm	
Zahnband Gr. M - L - XL	2,4 x 0,2 x 40 cm	
Ratschenschnalle Gr. XXXS		
Ratschenschnalle Gr. XXS		
Ratschenschnalle Gr. XS - S	B-19-STAR-BL	
Ratschenschnalle Gr. M - L - XL	B-24-STAR-BL	

Lagerungs- und Transportbedingungen

	Temperaturbereich bei langfristiger Lagerung von -10°C bis +40°C. Kurzfristige Temperaturspitzen, z.B. im Rahmen des Transports, von -20°C bis +60°C werden vom Material gut toleriert und wirken sich nicht auf die Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Produkts aus.
	Bei Lagerung und Transport vor Feuchtigkeit schützen

Gewährleistung

Für dieses Produkt übernehmen wir die Gewährleistung, entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen. Diese erstreckt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler. Hiervon ausgeschlossen sind Verschleißteile und Teile/Baugruppen, die einer bestimmungsgemäßen Abnutzung unterliegen sowie Schäden, die sich als Folge übermäßiger Beanspruchung, „nicht-bestimmungsgemäßer Anwendung“, gewaltsamer Beschädigung oder unzulässiger Änderung/Instandsetzung ergeben. Im Gewährleistungsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben. Aus Gründen der Produkthaftung dürfen Reparatur-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur durch autorisierte Fachhändler, unter Verwendung von Original-Ersatzteilen, durchgeführt werden



Hersteller:

A2J GmbH
Am Fuchsberg 13
D-87452 Altusried
Fon: +49 (08373) 987269
Fax: +49 (08373) 987276
eMail: info@a2j-intl.com
Internet: www.a2j-intl.com

Stand 01.01.2025



Dieses Produkt ist konform mit den Grundlegenden Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte – Medical Device Regulation (MDR)

Technische Änderungen vorbehalten