

PELVI.LOC® PL-3DASR Aktiv Schale Reverso

PELVI.LOC® PL-3D Beckengurte

HMV.Nr.: 26.99.02.2000



Modell

Becken-Retraktions-Gurt für Sitzschalen

Großflächiger 3D-Gurt für Rollstuhlfahrer - der Gurt für den höheren Anspruch, zur Montage an Sitzschalen. Die vergrößerten Oberschenkel-Pelotten sorgen auch bei hoher Zugkraft, z.B. durch sportliche Betätigung, für eine optimale Druckverteilung und Stabilität im Sitz.

Zusatzartikel

Rohrschellen zur Befestigung des Gurtes am Rollstuhlrahmen in folgenden Durchmessern lieferbar.

Artikelnummern


RS-20: Rohrdurchmesser 20 mm

RS-22: Rohrdurchmesser 22 mm

RS-25: Rohrdurchmesser 25 mm

RS-30: Rohrdurchmesser 30 mm

RS-32: Rohrdurchmesser 32 mm

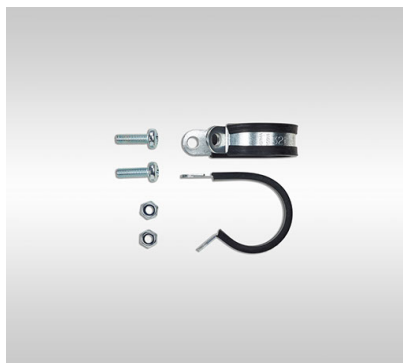

Anwendungsbereich

Für Sitzschalen zur besseren Becken-Positionierung im Rollstuhl.

Besondere Merkmale

Der Gurt für hohe Zugkräfte mit 1/3 mehr Pelotten-Fläche als 3D Basic. Mit einfach zu bedienenden Ratschen-Schnallen wird die Passform des Gurtes eingestellt. Die im Polster verdeckten Ratschenschnallen verhindern das unbeabsichtigte Öffnen des Gurtes und bieten einen Schutz gegen Verletzungen, verursacht durch unkontrollierte Bewegungen. Die Becken-Pelotten werden in der Mitte über einen Lochriemen verbunden, der zur Sicherheit zusätzlich in einer Lasche geführt wird.

Die Zahnriemen bleiben seitlich an der Sitzschale befestigt, zum Umsetzen werden nur die Pelotten abgenommen. Die facettenartige Ausdünnung des Polstermaterials im Übergang von der Pelotte zum Zahnriemen verhindert seitliche Druckstellen am Becken.

Artikelnummern

PL-3DASR-XS für SB 16-24 cm

PL-3DASR-S für SB 20-32 cm

PL-3DASR-M für SB 30-40 cm

PL-3DASR-L für SB 36-46 cm

Technische Daten

	XXXS Bambino	XXS	XS	S	M	L	XL
Sitzbreite (cm)			16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	
Polstergröße (cm)			17,5 x 9	20 x 11	23 x 13	25,5 x 14	
Gewicht (g)			220	220	280	280	
Sollbruchstelle (bei ca. kg)			60	60	80	80	

Zahnband Gr. XXXS - XXS		Produkt ist latexfrei		
Zahnband Gr. XS - S	1,9 x 0,2 x 40,0 cm			
Zahnband Gr. M - L - XL	2,4 x 0,2 x 40,0 cm			
Ratschenschnalle Gr. XXXS				
Ratschenschnalle Gr. XXS				
Ratschenschnalle Gr. XS - S	B-19-ERGO-BL			
Ratschenschnalle Gr. M - L - XL	B-24-ERGO-BL			
Lochriemen				